

Instructions for Use English from page 03

Gebrauchsanweisung Deutsch ab Seite 31

Mode d'emploi Français à partir de la page 59

Istruzioni per l'uso Italiano da pagina 87

Instrucciones de Uso Español desde la página 115

daysy®



Love your body:  
Welcome to Daysy

# — Table of Contents

**Page 6 to 8 | Precautions**

What you need to know.

**Page 9 to 21 | Operation**

How to use Daysy.

**Page 22 to 30 | Technical notes and warranty**

What else you need to know.

# About Daysy

Daysy calculates a woman's daily menstrual cycle status by interpreting her basal body temperature. Daysy displays your menstrual cycle status using colored lights. Daysy is to be used to facilitate conception. Daysy is not a replacement for contraception, nor is it a medical thermometer.

## **Included in delivery:**

- Daysy
- Sensor cap
- Micro USB cable
- Instructions for Use
- Quick Guide

## — Precautions


- Before using your Daysy for the first time, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for later reference.
- Before you start using your Daysy, you need to entirely discontinue hormonal methods of birth control.
- Daysy can better determine your cycle if you have regular cycles.
- Daysy is not suitable for use if you are undergoing hormonal treatment, or if you are using hormonal methods of birth control.
- Daysy does not protect you from sexually transmitted diseases.
- You should always read your daily fertility status from Daysy itself, not the app.
- Before using Daysy for the first time, charge the battery fully.
- Never open the housing.
- Never chew on the sensor.
- Make sure that the device or its individual parts are not swallowed.
- **WARNING:** The device must not be modified.
- **WARNING:** Avoid using Daysy at or less than 30 cm away from other electrical equipment, as this could result in improper operation.

- **WARNING:** Use of cables or equipment other than those specified in this document may cause electrical interference or lead to failure of Daysy.
- Do not expose your Daysy to high temperatures (e.g. boiling water).
- Do not expose your Daysy to direct sunlight for long periods of time.
- Do not expose your Daysy to liquids such as running water.
- Only take measurements in your mouth.
- Do not insert the measuring sensor too far into your mouth.
- Do not take measurements if the housing and/or sensor is broken.
- Do not take measurements if you have an injury in your mouth.
- Do not expose your Daysy to heavy mechanical loads.
- Only take measurements when the USB cable is NOT connected.
- Only charge your Daysy using a standard 5V USB port (IEC 60950-1 compliant) with a maximum output current of 1A and a maximum power of 4.5W with a cable shorter than 50cm. Do not take measurements while your Daysy is charging.
- If your Daysy causes irritation to your skin, we recommend you stop using it immediately and contact our Customer Support as soon as possible.

- Do not stick sharp objects into your Daysy.
- All serious incidents associated with this product should be reported to the manufacturer and the relevant government authority responsible in the EU member state.
- Your Daysy is intended for you alone. You should not share it with other women. If you do wish to pass it on to a friend, you will need to delete your data first and unpair Daysy in the app (if you use it).
- Only pass your Daysy on to another person with all instructions. You will also find the instructions and further useful information available for download at [daysy.me](https://daysy.me).
- As a user, you can use every feature of your Daysy. You can also clean the sensor yourself when your Daysy is switched off.
- Your Daysy is not a contraceptive.
- Keep Daysy away from children and pets.



# All the features at a glance\*

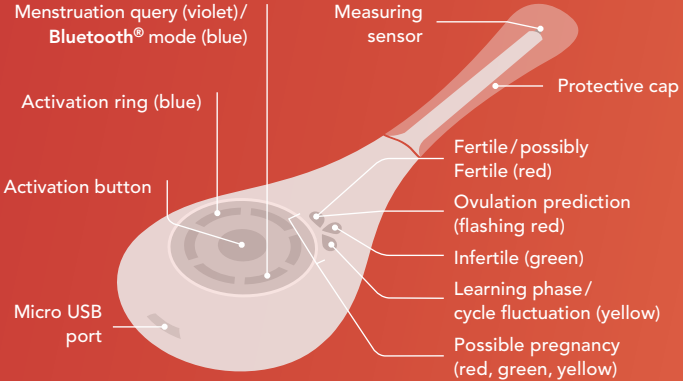

\* Page 13 shows you all the important display combinations

## — Step 1: Charge your Daysy

1. Connect your Daysy to the micro USB cable supplied in your package and the cable to a USB port. Make sure it is a 5V port that does not supply more than 1A current.
2. Press the activation button to see the charging status. The blue lights moving from bottom to top indicate Daysy is charging. Daysy will enter standby mode after 60 seconds but will continue charging.\*
3. All blue lights remain illuminated when Daysy is fully charged. Simply press the activation button once to check the status. (A low battery condition is indicated by all blue lights flashing.)
4. Disconnect the cable from your Daysy. You can now begin using your Daysy.\*\*

\* Do not measure or try to sync whilst Daysy is charging.

\*\* You can start measuring at any time in your cycle.

# Measurement indicators: What each indicator means



**Flashing violet light:** Your Daysy is asking if you are menstruating. Confirm that you are menstruating by holding down the activation button for 2 seconds.



**Violet light remains constantly illuminated:** Daysy confirms your menstruation input. If you have entered your menstruation incorrectly or by mistake, hold the activation button for 2 seconds until the violet light starts flashing again.



**Blue light rotating in a clockwise direction:** Your Daysy is measuring your temperature. Holding down the activation button for 2 seconds stops the measurement.

## — Step 2: Measure your temperature

Use your Daysy every day after waking up and before you get out of bed. Please be sure to sleep 3 consecutive hours immediately prior to measuring.

1. Remove the protective cap and briefly press the activation button once. Your predicted fertility status will be displayed.
2. Press the button a second time and the activation ring will flash in a clockwise direction. You can now take a measurement.
3. Place the sensor as far back as is comfortable under the right or left side of your tongue and then close your mouth.
4. "Beep-beep" means that the measurement phase has successfully completed.\*
5. The confirmed fertility status displayed after measurement is valid until midnight. You can view your fertility status again later in the day by pressing the activation button once briefly. The next day, your Daysy switches to the predicted fertility status before your measurement.

*\* If you hear a "grumble-buzz" sound instead of a "beep-beep", it means that the measurement was unsuccessful, and you will need to try again.*

# Fertility indicators: What each indicator means



Fertile/possibly fertile



Ovulation prediction



Infertile



Possible pregnancy



Learning phase/  
cycle fluctuation  
(potentially fertile)



Highly probable  
pregnancy

## — Step 3: Enter your menstruation

If the violet **“Menstruation”** light is flashing in the activation ring, it means that Daysy is asking for your menstruation input.\*

- **If you are menstruating:** Press the activation button until the violet light illuminates without flashing and you hear a “beep”. Confirm you are menstruating for each day of active bleeding and flow for a minimum of 3 consecutive days. Always confirm menstruation, even if you did not take your temperature that day.
- **If you are not menstruating:** You do not have to do anything, just take your temperature.
- **If you are menstruating, but Daysy is not showing the flashing violet light:** Press the activation button until the violet light is constantly illuminated.

*\* Menstruation can be edited for up to 3 past days. Please enter and edit menstruation on the device itself. For instructions, watch our tutorials at [daysy.me/tutorials](https://daysy.me/tutorials).*

# DaysyDay: Better informed with the Daysy app



DaysyDay provides valuable insights to your cycle and additional viewing and tracking features, as well as a Partner App.

Turn on **Bluetooth®** on your mobile phone, open DaysyDay and select the **Bluetooth®** button. Follow the on-screen instructions to turn Daysy on and press the Daysy activation button twice briefly. A blue light will light up on your Daysy followed by a brief melody. If the blue light stays lit, it means the connection was successful.




**Flashing blue light:**  
Daysy is connecting.



**Continuous blue light:**  
Daysy is connected.

# Temperature and fertility: The course of your cycle

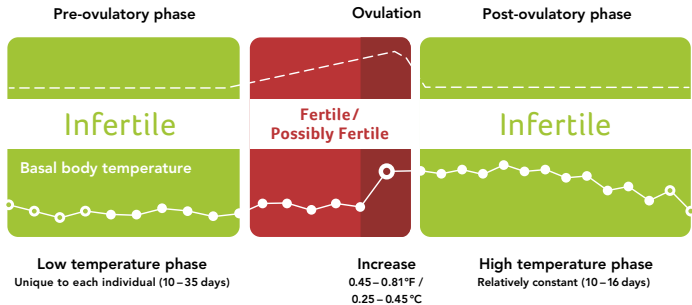



# Important: How to you use your Daysy correctly

- Make sure the first thing you do is take your temperature every morning before you get out of bed. For the optimal use of Daysy we recommend that you sleep at least 3 consecutive hours before measuring. If you forget, and have already gotten out of bed, do not proceed to take your temperature.
- If you are menstruating, enter this input accordingly. It is important to begin with the first day of active red blood flow.\*
- The more regularly you take your temperature, the faster Daysy will get to know your cycle.
- When you start using your Daysy, you will initially see a lot of yellow and red days. Over the course of the next 3–4 cycles, Daysy learns your unique menstrual cycle rhythm.

\* **Important:** *The first bleeding after stopping the pill or other hormonal contraceptive methods is a hormonal withdrawal bleeding and not a menstruation. DO NOT enter this bleeding as menstruation.*

## — Cleaning

- Clean Daysy before and after every use.
- Use a damp cloth to carefully clean the sensor on your Daysy. You can also use a little alcohol or soap if you wish. Since your Daysy is not waterproof, make sure that only the neck of the sensor, and not the whole appliance comes into contact with water. Do not clean under running water.

## Battery

- A single battery charge will last 1–2 months, depending on how often you use your Daysy. To indicate that the battery is nearly empty, the activation ring on your Daysy will flash at frequent intervals. Make sure you charge the battery within a week. With normal use, the battery will still charge to 80% of its capacity after 500 charging cycles.
- **Note:** You should not take measurements while your Daysy is charging.

# Error messages / Problems during use

## ***My Daysy does not respond when I press the activation button.***

Please charge your Daysy and try activating her again before contacting our Customer Support.

## ***The activation ring on my Daysy flashes blue at short intervals.***

Please charge the battery on your Daysy.

## ***My Daysy fails to start taking a measurement.***

- Remove the USB cable before taking a measurement.
- If your Daysy makes a “beep-beep” sound, it means you have already successfully taken a measurement today.

*For more information, read our FAQ at [daysy.me](http://daysy.me) or contact our Customer Support.*

---

***My Daysy ends the measurement with a “grumble-buzz” instead of a “beep-beep”.***

The measurement took too long, was interrupted, or was unsuccessful.

Try following these tips:

- As before, place the sensor as far back as is comfortable under the right or left side of your tongue.
- Close your mouth.
- Do not remove the your Daysy from your mouth until you hear the “beep-beep”.
- Daysy may not accept the measurement if you have a fever.  
Stop taking measurements if you are sick.
- If the sensor gets dirty, simply clean it with a damp cloth.

***The red indicator lights up and the activation ring flashes at short intervals.***

Something is wrong with your Daysy. Please contact our Customer Support.

## ***I won't use my Daysy in the next few months.***

### ***What do I need to do?***

If you do not intend to use your Daysy for a long period, clean her, charge the battery fully, and store her in a cool, dry place. Make sure to charge your Daysy every 2–3 months.

### ***How does my Daysy communicate with me?***

- “Beep-beep”: Daysy is happy. The measurement was a success.
- “Grumble-buzz”: Daysy is unhappy. The measurement was not a success.
- “Beep”: Daysy beeps when you press the activation button.
- Melody: Daysy has just activated **Bluetooth®**.

*For more information, read our FAQ at [daysy.me](https://daysy.me) or contact our Customer Support.*

# — Technical data

## **Key features**

**Name and model:** Daysy **Power supply:** Internal power source

**Contains FCC ID:** WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **USB port:** USB 2 Micro-B

## **Compatibility**

Compatibility at date of manufacture. Current compatibilities available on the website and app store descriptions.

**iOS:** Version 12.0 and higher **Android:** Google Android version 5.0 and higher

**Bluetooth®:** Version 4.0 and higher

**Dimensions:** H/W/D 13/2.2/4.8 cm **Weight:** 38g **EAN Code:** 7629999 054073

## **Technical Information**

You need a **Bluetooth®**-enabled smartphone or a tablet running iOS 12.0/Android 5.0 or higher to be able to use the DaysyDay app.

**Bluetooth®:** Bluetooth® 4.1 **Frequency band:** 2400 – 2480 MHz

**GFSK modulation:** FHSS **Transmitting power:** 0 dBm

# Indications and contraindications

**Indications:** Daysy is a menstrual fertility tracker. For optimal use of Daysy, cycle lengths of 19–40 days are the ideal requirement.

**Contraindications:** In the following cases, you should **not** use Daysy:

- You suffer from a condition in which pregnancy could be dangerous for you, e.g. your blood pressure is too high or too low, you are suffering from heart disease, etc.
- Health risks exist during pregnancy for your unborn child, e.g. if you are suffering from drug or alcohol addiction, or if you are taking medication that may cause birth defects.
- If you are undergoing hormonal treatment, or if you are using hormonal methods of birth control.
- In case of irregular bleeding. This can interfere with the prediction of your fertility or render it unusable.
- Daysy is not a medical thermometer and should not be used to measure body temperature as an indication of fever or illness.

## — Note on electromagnetic compatibility

**Electrical medical appliances are subject to special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC).** Daysy is intended for non-commercial home use only.


**Portable and mobile RF communication appliances may affect medical electrical equipment.** Daysy meets the requirements of EN 60601-1-2 for electromagnetic compatibility. Details of this measurement data can be obtained from our Customer Support or from [daysy.me](http://daysy.me).

## Target group profile

Women aged 18 or older, who can read and write.



# Device Label

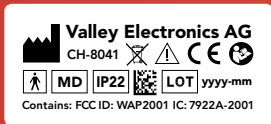

The following figure shows the device label that is attached to the back of your Daysy. The label is shown enlarged for improved readability.

# General information



**Manufacturer**



**Read these instructions carefully**



**Attention**



**CE label**



**Medical device**



**LOT number/  
manufacturing date**



**EU Authorised  
Representative**



**WEEE:** Please dispose of this appliance at public recycling depots for electrical appliances. Local laws/regulations prohibit disposing of this appliance with your general domestic garbage.



**Type-BF application parts**



**IP code:** Protected against solid foreign bodies with a diameter of 12.5 mm and splash-proof when the housing is tilted at 15°.

**Patent number:** US 8,998,822  
**U.S. Patent** D865,542

# Storage and operating conditions



**Temperature limit:** This device can be stored at temperatures between  $-4^{\circ}\text{F}$  and  $113^{\circ}\text{F}$  /  $-20^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$ .



**Temperature limit:** This device can be used without restriction at temperatures between  $41^{\circ}\text{F}$  and  $104^{\circ}\text{F}$  /  $5^{\circ}\text{C}$  and  $40^{\circ}\text{C}$ .



**Humidity limit:** This device can be stored without restriction at a relative humidity up to 93 %.



**Humidity limit** This device can be used without restriction at a relative humidity of between 15 % and 93 %.



**Pressure limit:** This device can be stored at pressures of between 700 hPa and 1060 hPa.



**Pressure limit:** This device can be subjected to pressures of between 700 hPa and 1060 hPa.

## — Warranty information

Daysy has been manufactured with the utmost care using premium-quality, state-of-the-art materials. Each Daysy is subjected to numerous controls and inspections prior to delivery.

1. We guarantee the original purchaser that Daysy is free of defects in materials and workmanship during the warranty period.
2. The warranty period begins on the day the new Daysy is sold to the end user by an authorized dealer.\* The warranty is valid for two years.
3. We undertake to either repair a defective device or replace it with a new one. Further claims, and, in particular, claims for losses and damages, including consequential damages, are excluded. The warranty does not cover indirect damages.

*\* Please note that our limited warranty applies only if you purchased your Daysy from an authorized Valley Electronics dealer.*

4. The warranty does not cover any damage caused by improper handling, especially by opening the device, or by other external influences.
5. Warranty claims are only valid if the user indicates the defect immediately in writing within two weeks after such a defect is discovered. Once the defect is discovered, the user should no longer use the Daysy, but return it to the authorized distributor with a copy of the original purchase invoice via insured delivery.

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact your Daysy dealer.

# — Overview: What do the indicators mean?

Status Indicator			M light	Ring	Meaning
Red	Green	Yellow	Violet	Blue	
Illuminated	–	–	–	–	Fertile / possibly fertile
Flashes	–	–	–	–	Ovulating (prediction)
–	Illuminated	–	–	–	Infertile
–	–	Illuminated	–	–	Learning phase or cycle fluctuation
Illuminated	Illuminated	Illuminated	–	–	Highly probable pregnancy
Flashes	Flashes	Flashes	–	–	Possible pregnancy
–	–	–	Flashes	–	Daysy asks for your menstruation input
–	–	–	Illuminated	–	Menstruation confirmed for this day
–	–	–	–	Rotates	Temperature measurement
–	–	–	–	Flashes	Charge battery
–	–	–	–	Rising	Battery charging
–	–	–	–	Illuminated	Battery charged
–	–	–	–	1 light flashes	<b>Bluetooth®</b> enabled, but no connection
–	–	–	–	1 light illuminated	<b>Bluetooth®</b> enabled, connection is established

# Love your body: Willkommen bei Daysy

# — Inhaltsverzeichnis

## **Seite 34 bis 36 | Sicherheitshinweise**

Was Du beachten musst.

## **Seite 37 bis 49 | Funktionsweise**

Wie Du Daysy nutzt.

## **Seite 50 bis 58 | Technische Hinweise und Garantie**

Was Du sonst noch wissen musst.



# Über Daysy

Daysy berechnet den täglichen Zyklusstatus von Frauen, indem die Basaltemperatur interpretiert wird. Mit farbigen Lichtern zeigt Daysy Dir so Deinen Zyklusstatus an. Daysy ist zur Empfängnisförderung anzuwenden. Daysy ist kein Ersatz für die Verhütung und sie ist auch kein medizinisches Thermometer.

## **Lieferumfang:**

- Daysy
- Schutzkappe für Sensor
- Micro-USB-Kabel
- Gebrauchsanweisung
- Quick Guide



## Sicherheitshinweise

- Bitte lies diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Du Daysy das erste Mal benutzt, und bewahre die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
- Eine hormonelle Verhütung muss zuerst abgesetzt werden, bevor Du mit der Nutzung von Daysy beginnst.
- Daysy kann Deinen Zyklus besser bestimmen, wenn Du regelmässige Menstruationszyklen hast.
- Daysy ist nicht geeignet, wenn Du einer hormonell bedingten Behandlung unterliegst oder wenn Du hormonell verhütet.
- Daysy schützt Dich nicht vor Geschlechtskrankheiten.
- Lies den täglichen Fruchtbarkeitsstatus nicht von der App, sondern direkt von Daysy ab.
- Bevor Du Daysy das erste Mal benutzt, lade den Akku vollständig auf.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.
- Es darf nicht am Sensor gekaut werden.
- Das Gerät oder Teile davon dürfen nicht verschluckt werden.

- **WARNUNG:** Die Verwendung von Daysy auf oder in einem Abstand geringer als 30 cm zu anderen elektrischen Geräten sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte.
- **WARNUNG:** Die Verwendung von anderen Kabeln oder Ausrüstungen als in diesem Dokument definiert, kann elektrische Interferenzen oder ein Versagen von Daysy verursachen.
- Das Gerät darf nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden (z.B. in kochendem Wasser).
- Das Gerät darf nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten, wie z.B. fließendem Wasser in Berührung kommen.
- Messungen dürfen ausschliesslich im Mund vorgenommen werden.
- Pass auf, dass Du den Messsensor nicht zu tief in den Mund steckst.
- Bei defektem Gehäuse und/oder Sensor nicht mehr messen.
- Zum Laden darf Daysy nur mit einem Standard-5V-USB-Anschluss (IEC 60950-1 konform) mit maximal 1A Ausgangsstrom und einer maximalen Ausgangsleistung von 4,5 W mit einem Kabel kürzer als 50 cm verwendet werden. Beim Laden darf Daysy nicht zum Messen genutzt werden.
- Bei Verletzungen im Mund nicht mehr messen.

- Daisy darf keinen hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Keine spitzen Gegenstände in Daisy stecken.
- Messungen dürfen nicht durchgeführt werden, solange das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Führt das Gerät zu Hautirritationen, empfehlen wir den sofortigen Verwendungstopp und die umgehende Kontaktaufnahme mit unserem Kundenservice.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats zu melden.
- Daisy ist ein persönliches Gerät. Es darf nicht mit einer anderen Person geteilt werden. Wenn Du Daisy an eine Freundin weitergeben willst, musst Du erst Deine Daten löschen und Daisy in der App trennen (falls Du sie benutzt).
- Gib Daisy nur mit der Gebrauchsanweisung an Dritte weiter. Die Gebrauchsanweisung und weitere Informationen findest Du auch unter [daysy.me](https://daysy.me).
- Als Bedienerin kannst Du jede Funktion von Daisy nutzen. Auch das Reinigen des Sensors kannst Du selbst durchführen, wenn Daisy dabei ausgeschaltet ist.
- Daisy ist keine Verhütung.
- Daisy von Kindern und Haustieren fernhalten.

# Alle Funktionen auf einen Blick\*



\* Auf Seite 41 findest Du alle wichtigen Anzeigekombinationen.

# Schritt 1: Lade Deine Daysy

1. Verbinde Deine Daysy mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel und das Kabel mit einem USB-Anschluss. Achte darauf, dass dieser eine Spannung von 5 V hat und nicht mehr als 1A Strom liefert.
2. Durch kurzes Drücken der Aktivierungstaste kannst Du den Ladestatus sehen. Die blauen Lichter, die sich von unten nach oben bewegen, zeigen an, dass Daysy gerade geladen wird. Daysy geht nach 60 Sekunden in den Standby-Modus, lädt aber weiter auf.\*
3. Wenn Daysy vollständig geladen ist, leuchten alle blauen Lichter gleichzeitig. Drücke einfach einmal die Aktivierungstaste, um den Ladestatus zu überprüfen. (Ein niedriger Ladezustand wird durch das Blinken aller blauen Lichter angezeigt.)
4. Entferne das USB-Kabel. Du kannst jetzt anfangen Deine Daysy zu benutzen.\*\*

*\* Nimm keine Messung vor und versuche nicht zu synchronisieren, während Daysy geladen wird.*

*\*\* Du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Deinem Zyklus mit Daysy starten.*

# Messanzeigen: Welche Anzeigen was bedeuten



**Blinkendes violettes Licht:** Daysy wartet auf Deine Menstruationseingabe. Bestätige Deine Menstruation, indem Du die Aktivierungstaste zwei Sekunden lang gedrückt hältst.



**Konstant leuchtendes violettes Licht:** Daysy bestätigt Deine Menstruationseingabe. Falls Du aus Versehen Deine Menstruation falsch eingegeben hast, halte die Aktivierungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das violette Licht wieder blinkt.



**Im Uhrzeigersinn rotierendes blaues Licht:** Daysy misst Deine Temperatur. Durch Drücken der Aktivierungstaste für zwei Sekunden wird die Messung abgebrochen.

## Schritt 2: Miss Deine Temperatur

Benutze Daysy täglich direkt nach dem Aufwachen, bevor Du aufstehst und aktiv wirst. Du solltest direkt vor der Messung 3 Stunden durchgehend geschlafen haben.

1. Entferne die Schutzkappe und drücke einmal kurz die Aktivierungstaste. Der prognostizierte Fruchtbarkeitsstatus wird angezeigt.
2. Drücke ein zweites Mal auf die Taste, und der Aktivierungsring leuchtet rotierend im Uhrzeigersinn. Die Messung kann beginnen.
3. Lege den Sensor möglichst weit hinten, so dass es für Dich angenehm ist, rechts oder links unter Deine Zunge und schliesse Deinen Mund.
4. „Pieps-pieps“ gibt das Ende der erfolgreichen Messung an.\*
5. Nach der Messung ist der angezeigte Fruchtbarkeitsstatus bis Mitternacht gültig. Du kannst auch später am Tag Deinen Fruchtbarkeitsstatus sehen, indem Du einmal kurz auf die Aktivierungstaste drückst. Am nächsten Tag wechselt Daysy vor der neuen Messung auf die Fruchtbarkeitsprognose.

*\* Falls Du ein ärgerliches „Brumm“ anstelle eines „Pieps-pieps“ hörst, war die Messung nicht erfolgreich, und Du musst sie wiederholen.*



# Fruchtbarkeitsanzeigen: Welche Anzeigen was bedeuten



Fruchtbar / möglich fruchtbar



Prognostizierter Eisprung



Unfruchtbar



Mögliche Schwangerschaft



Daysy lernt /  
Zyklusschwankung  
(möglich fruchtbar)



Sehr wahrscheinliche  
Schwangerschaft

## Schritt 3: Gib Deine Menstruation ein

Blinkt das violette Licht „**Menstruation**“ im Aktivierungsring, fragt Daysy nach Deiner Menstruationseingabe.\*

- **Falls Du Deine Menstruation hast:** Halte die Aktivierungstaste gedrückt, bis das violette Licht konstant leuchtet und Du ein „Pieps“ hörst. Bestätige Deine Menstruation an jedem Tag, an dem Du sie hast, mindestens aber an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Bestätige immer die Menstruation, auch wenn Du an diesem Tag nicht gemessen hast.
- **Falls Du Deine Menstruation nicht hast:** Du musst nichts tun, miss nur Deine Temperatur.
- **Falls Du Deine Menstruation hast, aber Daysy nicht violett blinkt:** Halte die Aktivierungstaste so lange gedrückt, bis das violette Licht konstant leuchtet.

*\* Du kannst Deine Menstruation bis zu 3 Tage rückwirkend bearbeiten. Bitte nimm Eingaben und Änderungen der Menstruation immer auf Daysy selbst vor. Du findest dazu Tutorials auf unserer Website unter [daysy.me/tutorials](https://daysy.me/tutorials).*

# DaysyDay: Besser informiert mit der Daysy-App



DaysyDay bietet Dir wertvolle Informationen zu Deinem Zyklus und zusätzliche Tracking-Funktionen, sowie eine Partner-App.

Aktiviere **Bluetooth®** auf Deinem Smartphone, öffne DaysyDay und tippe auf den **Bluetooth®**-Button. Folge den Anweisungen der App, um Daysy zu aktivieren, und drücke danach zweimal kurz die Aktivierungstaste von Daysy. Auf Daysy blinkt nun ein blaues Licht auf und eine kurze Melodie ertönt. Leuchtet das blaue Licht konstant, war die Verbindung erfolgreich.




**Blinkendes blaues Licht:**  
Daysy verbindet sich.



**Konstant leuchtendes blaues Licht:**  
Daysy ist verbunden.

# — Temperatur und Fruchtbarkeit: So verläuft Dein Zyklus

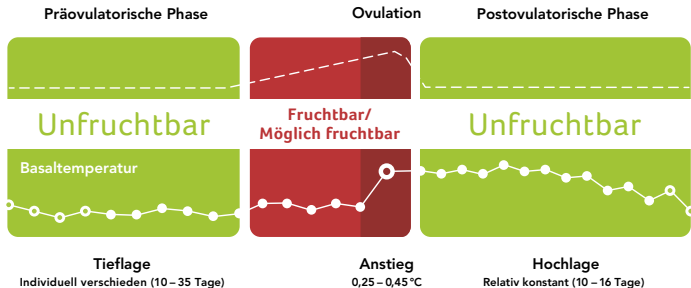

# Wichtig: So nutzt Du Daysy richtig

- Achte darauf, Daysy täglich direkt nach dem Aufwachen, bevor Du aufstehst und aktiv wirst, zu verwenden. Für die optimale Nutzung von Daysy empfehlen wir, dass Du vor der Messung zumindest 3 Stunden durchgehend geschlafen hast. Falls Du schon aufgestanden bist, lass die Messung ausfallen.
- Wenn Du Deine Menstruation hast, gib dies entsprechend ein. Es ist wichtig, mit dem ersten Tag mit vollem Blutfluss zu beginnen.\*
- Je regelmässiger Du Deine Temperatur misst, desto schneller lernt Daysy Deinen Zyklus kennen.
- Zu Beginn der Anwendung wirst Du viel Gelb und Rot sehen. Im Laufe der nächsten 3–4 Zyklen lernt Daysy Deinen persönlichen Menstruationszyklus kennen.

\* **Wichtig:** Die erste Blutung nach Absetzen der Pille oder anderer hormoneller Verhütungsmethoden ist eine hormonell bedingte Entzugsblutung und keine Menstruation. Gib diese Blutung auf keinen Fall als Menstruation ein.

## — Reinigung

- Daysy vor und nach jedem Gebrauch reinigen.
- Reinige den Sensor von Daysy vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Es kann auch wenig Alkohol oder Seife verwendet werden. Achte darauf, dass nur der Sensorhals mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, da Daysy nicht wasserdicht ist. Reinige Daysy nicht unter fließendem Wasser.

## Akku

- Je nach Nutzung von Daysy hält eine Akkuladung 1–2 Monate. Kurz bevor der Akku leer ist, blinkt Daysys Aktivierungsring in kurzen Abständen. Bitte lade den Akku innerhalb von einer Woche. Bei normalem Gebrauch hat der Akku nach 500 Ladezyklen noch 80 % seiner Kapazität.
- **Hinweis:** Während Daysy geladen wird, kannst Du keine Messung durchführen.

# Fehlermeldungen und Bedienprobleme

## ***Daysy reagiert nicht nach dem Drücken der Aktivierungstaste.***

Bitte lade Daysy und versuche es erneut, bevor Du Dich beim Kundendienst meldest. Achte darauf, Deine Daysy alle 2–3 Monate zu laden.

## ***Daysys Aktivierungsring blinkt in kurzen Abständen blau.***

Bitte lade den Akku von Daysy.

## ***Daysy startet keine Messung.***

- Entferne das USB-Kabel vor der Messung.
- Wenn Daysy direkt „Pieps-pieps“ macht, hast Du heute schon eine erfolgreiche Messung abgeschlossen.

Weitere Informationen findest Du auf [daysy.me](https://daysy.me) unter FAQ, oder kontaktiere unseren Kundendienst.

***Daysy beendet die Messung mit einem ärgerlichen „Brumm“ anstatt mit „Pieps-pieps“.***

Die Messung dauerte zu lange, wurde abgebrochen oder war nicht erfolgreich. Versuche, diese Tipps zu befolgen:

- Lege den Sensor erneut ganz hinten rechts oder links unter Deine Zunge.
- Schliesse Deinen Mund.
- Nach Messbeginn darf Daysy nicht aus dem Mund genommen werden, bis Du den „Pieps-pieps“-Ton hörst.
- Solltest Du Fieber haben, kann es sein, dass Daysy die Messung nicht akzeptiert. Lass bei Krankheit die Messungen ausfallen.
- Sollte Dein Sensor stark verschmutzt sein, reinige ihn mit einem feuchten Tuch.

***Die rote Anzeige leuchtet auf und der Aktivierungsring blinkt in kurzen Abständen.***

Etwas stimmt nicht mit Daysy. Bitte kontaktiere unseren Kundendienst.



## ***Ich werde Daysy in den nächsten Monaten nicht benutzen. Was muss ich tun?***

Wenn Du Daysy für eine längere Zeit nicht benutzen willst, dann reinige sie, lade den Akku vollständig auf und bewahre sie an einem trockenen, kühlen Ort auf.

### ***Wie spricht Daysy mit mir?***

- „Pieps-pieps“: Daysy ist glücklich. Die Messung war erfolgreich.
- „Brumm“: Daysy ist nicht zufrieden. Die Messung war nicht erfolgreich.
- „Pieps“: Daysy piepst, wenn Du auf die Aktivierungstaste drückst.
- „Melodie“: Daysy hat soeben **Bluetooth®** aktiviert.

*Weitere Informationen findest Du auf [daysy.me](https://daysy.me) unter FAQ,  
oder kontaktiere unseren Kundendienst.*

# Technische Daten

## **Wichtigste Merkmale**

**Name und Modell:** Daysy **Spannungsversorgung:** Interne Stromquelle

**Contains FCC ID:** WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **USB-Anschluss:** USB 2 Micro-B

## **Kompatibilität**

Kompatibilität zum Zeitpunkt der Herstellung. Die aktuelle Kompatibilität findest Du auf unserer Website und in den Beschreibungen der App Stores.

**iOS:** Version 12.0 und neuer **Android:** Google-Android-Version 5.0 und neuer

**Bluetooth®:** Version 4.0 und neuer

**Abmessungen:** H/B/T 13/2.2/4.8 cm **Gewicht:** 38 g **EAN-Code:** 7 629999 054073

## **Informationstechnologie**

Zur Nutzung der DaysyDay-App ist ein **Bluetooth®**-fähiges Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem iOS 12.0 oder neuer bzw. Android 5.0 oder neuer notwendig.

**Bluetooth®:** Bluetooth® 4.1 **Frequenzband:** 2400 – 2480 MHz

**GFSK-Modulation:** FHSS **Sendeleistung:** 0 dBm

# Indikationen und Kontraindikationen

**Indikationen:** Daysy ist ein Zykluscomputer. Für die optimale Nutzung von Daysy sind Zykluslängen von 19 – 40 Tagen die ideale Voraussetzung.

**Kontraindikationen:** In folgenden Fällen solltest Du Daysy **nicht** benutzen:

- Es liegen Erkrankungen vor, die eine Schwangerschaft gefährlich für Dich machen, z. B. zu hoher oder zu tiefer Blutdruck, Herzerkrankungen etc.
- Es liegen bei einer Schwangerschaft gesundheitliche Risiken für Dein Kind vor, z. B. bei Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol oder bei Einnahme von Medikamenten, die Geburtsschäden verursachen können.
- Bei bei einer hormonellen Behandlung oder wenn Du hormonell verhütet.
- Bei sehr unregelmässigen Blutungen. Sie können eine einwandfreie Vorhersage Deiner Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder diese gar unmöglich machen.
- Daysy ist kein medizinisches Thermometer und soll nicht zur Messung der Körpertemperatur bei Fieber oder Krankheit verwendet werden.

## — Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit


**Medizinische elektrische Geräte unterliegen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) besonderen Vorsichtsmassnahmen.** Daysy ist nur für den privaten Gebrauch in häuslicher Umgebung bestimmt.

**Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können medizinische elektrische Geräte beeinflussen.** Daysy entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 für die elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten kannst Du bei unserem Kundendienst oder auf [daysy.me](http://daysy.me) erhalten.

## Zielgruppenprofil

Frauen, die 18 Jahre oder älter sind und die lesen und schreiben können.

# Geräteeikett

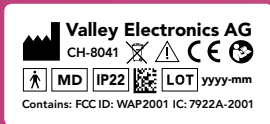

Die folgende Abbildung zeigt Dir das Geräteeikett, das auf der Rückseite von Daysy angebracht ist. Zur besseren Lesbarkeit ist das Etikett hier vergrößert abgebildet.

# — Allgemeine Informationen



**Hersteller**



**Gebrauchsanweisung beachten**



**Achtung**



**CE-Kennzeichnung**



**Medizinprodukt**



**LOT-Nummer /  
Herstellungsdatum**



**EU-Bevollmächtigter**



**WEEE:** Bitte entsorge das Gerät in den öffentlichen Sammelstellen für Elektrogeräte. Entsprechend der örtlichen Gesetzeslage/-bestimmungen darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden.



**Anwendungsteile des Typs BF**



**IP-Code:** Geschützt gegen feste Fremdkörper ab einem Durchmesser von 12,5 mm und gegen Spritzwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.

# Lager- und Betriebsbedingungen



**Temperaturbegrenzung:** Das Gerät kann bei einer Temperatur zwischen  $-20\text{ °C}$  und  $45\text{ °C}$  gelagert werden.



**Temperaturbegrenzung:** Das Gerät kann bei einer Temperatur zwischen  $5\text{ °C}$  und  $40\text{ °C}$  problemlos benutzt werden.



**Luftfeuchtigkeitsbegrenzung:** Das Gerät kann bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $0\%$  bis zu  $93\%$  problemlos gelagert werden.



**Luftfeuchtigkeitsbegrenzung:** Das Gerät kann bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $15\%$  bis  $93\%$  problemlos betrieben werden.



**Druckgrenze:** Das Gerät kann bei einem Druck zwischen  $700\text{ hPa}$  und  $1060\text{ hPa}$  gelagert werden.



**Druckgrenze:** Das Gerät kann bei der Benutzung einem Druck zwischen  $700\text{ hPa}$  und  $1060\text{ hPa}$  ausgesetzt werden.

# — Garantieinformationen

Daysy wurde unter Verwendung hochwertiger und modernster Materialien mit größter Sorgfalt hergestellt. Jede Daysy hat vor ihrer Auslieferung zahlreiche Kontrollen und Prüfungen durchlaufen.

1. Wir garantieren deshalb dem Erstkäufer, dass Daysy während der Garantiefrist frei von gebrauchsmindernden Material- und Fabrikationsfehlern ist.
2. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Verkaufs einer neuen Daysy vom autorisierten Händler\* an den Endabnehmer. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre.
3. Wir verpflichten uns, ein schadhaftes Gerät instand zu setzen oder durch ein neues Gerät zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Verluste und Schäden einschliesslich Mangelfolgeschäden, sind ausgeschlossen. Indirekte Schäden unterliegen nicht der Garantie.

*\* Bitte beachte, dass unsere Herstellergarantie nur gilt, wenn Du Deine Daysy im von Valley Electronics autorisierten Fachhandel erworben hast.*



4. Von der Garantie nicht umfasst sind alle Schäden, die durch unsachgemässe Handhabung, insbesondere Öffnen des Gerätes sowie äussere Einwirkungen entstanden sind.
5. Garantieansprüche bestehen nur, wenn der Endabnehmer uns den Mangel unverzüglich, spätestens binnen zwei Wochen nach Feststellung, schriftlich unter Übersendung der Erwerbsrechnung mitteilt und Daysy nach dem Auftreten des Mangels nicht mehr benutzt, sondern transportversichert an uns übersendet.

Für Fragen oder weitere Auskünfte kontaktiere Deinen Daysy-Händler.

# Übersicht: Was die Anzeigen bedeuten

Zyklusanzeige			M-LED	Ring	Bedeutung
Rot	Grün	Gelb	Violett	Blau	
leuchtet	–	–	–	–	Fruchtbar / möglich fruchtbar
blinkt	–	–	–	–	Eisprung (Prognose)
–	leuchtet	–	–	–	Unfruchtbar
–	–	leuchtet	–	–	Lernphase oder Zyklusschwankung
leuchtet	leuchtet	leuchtet	–	–	Sehr wahrscheinliche Schwangerschaft
blinkt	blinkt	blinkt	–	–	Mögliche Schwangerschaft
–	–	–	blinkt	–	Daysy bittet um Eingabe der Menstruation
–	–	–	leuchtet	–	Menstruation wurde für diesen Tag bestätigt
–	–	–	–	rotiert	Temperaturmessung
–	–	–	–	blinkt	Akku laden
–	–	–	–	aufsteigend	Akku lädt
–	–	–	–	leuchtet	Akku geladen
–	–	–	–	1 Licht blinkt	<b>Bluetooth®</b> aktiviert, Geräte nicht verbunden
–	–	–	–	1 Licht leuchtet	<b>Bluetooth®</b> aktiviert, Geräte verbunden

Aime ton corps:  
Bienvenue chez Daysy

# — Table des matières

## **Page 62 à 64 | Consignes de sécurité**

Ce qu'il faut savoir.

## **Page 65 à 77 | Fonctionnement**

Comment utiliser Daysy.

## **Page 78 à 86 | Consignes techniques et garantie**

Ce que tu dois également savoir.

# À propos de Daysy

Daysy calcule le statut quotidien de la fertilité des femmes sur la base de la méthode de la température corporelle basale. Ainsi, Daysy t'indique à l'aide de lumières de couleurs quand tu es fertile. Daysy est conçue pour faciliter la conception. Toutefois Daysy n'est pas un moyen contraceptif ni un thermomètre médical.

## **Inclus dans la livraison :**

- Daysy
- Capuchon de protection pour le capteur
- Câble micro USB
- Mode d'emploi
- Guide Rapide



## Consignes de sécurité


- Merci de lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser Daysy pour la première fois et de le conserver pour pouvoir le consulter de nouveau ultérieurement.
- Avant de commencer à utiliser Daysy, tu dois arrêter de prendre tout contraceptif hormonal.
- Daysy détermine mieux ton cycle si tes règles sont régulières.
- Daysy n'est pas adaptée si tu es soumise à un traitement hormonal ou si tu utilises un contraceptif hormonal.
- Daysy ne te protège pas de maladies sexuellement transmissibles.
- Ne lis pas le statut quotidien de fertilité sur l'application, mais directement sur Daysy.
- Avant la première utilisation, effectuer une charge complète de la batterie.
- Ne jamais ouvrir le boîtier.
- Ne jamais mordre le capteur de mesure.
- Veiller à ce que l'appareil et ses pièces détachées ne soient pas avalés.
- **AVERTISSEMENT** : éviter l'utilisation de Daysy à une distance inférieure à 30 cm d'autres appareils électriques, cela pourrait entraîner un fonctionnement défectueux.

- AVERTISSEMENT : ne pas apporter de modifications à l'appareil.
- AVERTISSEMENT : l'utilisation de câbles ou d'équipements autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer des interférences électriques ou une défaillance de Daysy.
- L'appareil ne doit pas être soumis à des températures trop élevées (par exemple de l'eau bouillante).
- L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des liquides tels que l'eau courante.
- Les mesures doivent uniquement être effectuées dans la bouche.
- Veiller à ce que le capteur de mesure ne soit pas inséré trop profondément dans la bouche.
- Ne pas effectuer de mesure en cas de boîtier et/ou capteur défectueux.
- Ne pas effectuer de mesure en cas de blessure dans la bouche.
- Daysy ne doit pas être soumise à de fortes charges mécaniques.
- Les mesures doivent être effectuées uniquement lorsque l'appareil n'est pas connecté au câble USB.
- Ne pas insérer d'objets pointus dans Daysy.

- Pour le chargement, Daysy doit uniquement être utilisée avec un port USB standard de 5V (conforme à la norme IEC 60950-1) avec un courant de sortie maximal de 1A et une puissance maximale de sortie de 4,5W avec un câble de moins de 50cm. Lors de la charge, Daysy ne doit pas être utilisée pour prendre des mesures.
- Si l'appareil entraîne des irritations de la peau, nous te conseillons d'interrompre immédiatement l'utilisation et de prendre contact dès que possible avec notre service après-vente.
- Tout incident grave survenant avec le produit doit être signalé au fabricant ainsi qu'aux autorités compétentes de l'état membre de l'Union européenne.
- Daysy est un appareil personnel. Il ne doit pas être partagé avec d'autres femmes. Si tu désires donner Daysy à une amie, il faut d'abord que tu effaces tes données et que tu déconnectes Daysy de l'application (si tu l'utilises).
- Ne donne Daysy à quelqu'un d'autre qu'avec le mode d'emploi. Tu trouveras également le mode d'emploi ainsi que de plus amples informations sur [daysy.me](https://daysy.me).
- En tant qu'utilisatrice, tu peux utiliser toutes les fonctions de Daysy. Tu peux également procéder toi-même au nettoyage du capteur, à condition que Daysy soit éteinte.
- Daysy n'est pas un contraceptif.
- Tenir Daysy hors de portée des enfants et des animaux.



# Toutes les fonctions en un coup d'œil\*

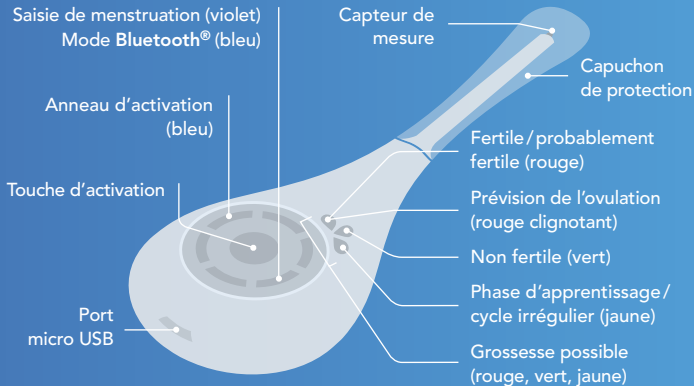

\* Tu trouveras toutes les combinaisons d'affichage importantes à la page 69.

## — Étape 1 : Charge ta Daysy

1. Connecte Daysy au câble micro USB livré avec l'appareil et relie le câble à un port USB. Veille à ce que celui-ci ait 5 V et qu'il ne fournisse pas un courant supérieur à 1 A.
2. Tu peux voir l'état de charge en appuyant brièvement sur le bouton d'activation. Les lumières bleues qui se déplacent de bas en haut indiquent que Daysy est en train de se charger. Daysy se remet en mode veille au bout de 60 secondes.\*
3. Toutes les lumières bleues restent allumées lorsque Daysy est complètement chargée. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'activation pour vérifier l'état de charge. (Une batterie faible est indiquée par le clignotement de toutes les lumières bleues.)
4. Débranche le câble de Daysy. Tu peux commencer à utiliser ta Daysy dès maintenant.\*\*

\* N'effectue pas de mesure ou n'essaie pas de synchroniser pendant que Daysy est en train de charger.

\*\* Tu peux démarrer avec Daysy à n'importe quel moment de ton cycle.

# Affichages de mesure : Que signifient les différents affichages ?



**Lumière violette clignotante :** Daysy attend que tu saisisses ta menstruation. Confirme ta menstruation en maintenant la touche d'activation appuyée pendant 2 secondes.



**Lumière violette brillant constamment :** Daysy confirme la saisie de ta menstruation. Si tu t'es trompée en saisissant ta menstruation, maintiens la touche d'activation appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que la lumière violette se remette à clignoter.



**Lumière bleue tournant dans le sens des aiguilles d'une montre :** Daysy mesure ta température. Maintenir la touche d'activation appuyée pendant 2 secondes pour interrompre la mesure.

## — Étape 2 : Mesure ta température

Prends ta température avec Daysy chaque jour juste après le réveil, avant de te lever et de t'activer. Il faut idéalement avoir dormi 3 heures consécutives juste avant la prise de la mesure.

1. Retire le capuchon de protection et appuie brièvement sur la touche d'activation. Le statut prévu de fertilité s'affiche alors.
2. Appuie une deuxième fois sur la touche et l'anneau d'activation s'allume alors dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu peux commencer à prendre ta température.
3. Place le capteur sous ta langue – le plus profondément possible à droite ou à gauche – et ferme la bouche.
4. « Bip-bip » indique que la mesure a été effectuée avec succès.\*
5. Après la prise de température, le statut de fertilité affiché est valable jusqu'à minuit. Tu peux également consulter ton statut de fertilité plus tard dans la journée en appuyant à nouveau sur la touche d'activation. Le lendemain matin avant la nouvelle mesure, Daysy passe à la prévision de fertilité.

*\* Si tu entends un « brrr » au lieu d'un « bip-bip », c'est que la mesure n'a pas fonctionné et que tu dois la recommencer.*

# Affichages de la fertilité : Que signifient les différents affichages ?



Fertile / probablement fertile



Prévision de l'ovulation



Non fertile



Grossesse possible



Phase d'apprentissage /  
cycle irrégulier  
(potentiellement fertile)



Grossesse  
très probable

## Étape 3 : Saisis ta menstruation

Si la lumière violette « menstruation » clignote dans l'anneau d'activation, cela signifie que Daisy te questionne au sujet de ta menstruation.\*

- **Si tu as tes règles :** appuie sur sur la touche d'activation jusqu'à ce que la lumière violette brille constamment et que tu entendes un « bip ». Confirme ta menstruation chaque jour où tu as tes règles, pendant au moins 3 jours consécutifs. Même si tu n'as pas pris ta température un jour, confirme quand même ta menstruation.
- **Si tu n'as pas tes règles :** tu n'as rien à faire, prends juste ta température.
- **Si tu as tes règles, mais que Daisy ne clignote pas en violet :** appuie sur la touche d'activation jusqu'à ce que la lumière violette brille constamment.

*\* Tu peux modifier ta menstruation jusqu'à maximum 3 jours après la date concernée. Veille toujours à entrer et modifier ta menstruation directement sur Daisy. Tu trouveras des tutoriels sur notre site web à l'adresse suivante : [daysy.me/tutorials](https://daysy.me/tutorials).*

# DaysyDay : Mieux informée avec l'application Daysy



DaysyDay te fournit des informations précieuses à propos de ton cycle et des fonctions de suivi supplémentaires, ainsi qu'une application partenaire.

Active **Bluetooth®** sur ton téléphone mobile, ouvre DaysyDay et clique sur le bouton **Bluetooth®**. Suis les consignes de l'application pour activer Daysy, puis appuie 2 fois sur le bouton d'activation de Daysy. Une lumière bleue s'allume sur Daysy et une mélodie retentit. Si la lumière bleue est constante, c'est que la connexion est établie.




**Lumière bleue clignotante :**  
Daysy se connecte.



**Lumière bleue brillant constamment :**  
Daysy est connectée.

# Température et fertilité: Voilà comment se déroule ton cycle

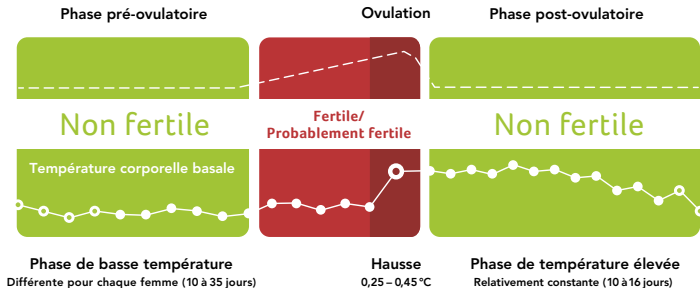



# Important: Comment utiliser Daysy correctement

- Veille à ce que ta première activité le matin soit la mesure de ta température, et ce avant que tu sortes du lit. Pour une utilisation optimale de Daysy, nous te recommandons de dormir au moins 3 heures d'affilée avant de prendre ta température. Si tu l'oublies et que tu t'es déjà levée, ne prends pas ta température.
- Lorsque tu as tes règles, saisis cette information. Il est important de commencer par le premier jour d'écoulement actif.\*
- Si tu mesures ta température régulièrement, Daysy apprendra à connaître ton cycle plus rapidement.
- Au début de l'utilisation, tu verras souvent des jours jaunes et rouges. Daysy doit d'abord apprendre à te connaître, pour cela, il lui faut 3 – 4 cycles de mesure.

\* **Important** : le premier saignement après l'arrêt de la pilule ou d'autres méthodes contraceptives hormonales est un saignement de retrait hormonal et non une menstruation. Ne jamais saisir ce saignement comme menstruation.

## — Entretien

- Nettoyer Daysy avant et après chaque utilisation.
- Nettoie le capteur de Daysy avec précaution à l'aide d'un chiffon humide. Il est également possible d'utiliser un peu d'alcool ou de savon. Veille à ce que seul l'embout du capteur soit en contact avec du liquide, car Daysy n'est pas étanche. Ne pas nettoyer Daysy sous l'eau courante.

## Batterie

- En fonction de l'utilisation de Daysy, une charge de batterie dure 1 – 2 mois. Peu avant que la batterie soit déchargée, l'anneau d'activation de Daysy clignote à intervalles rapides. Veille à charger la batterie dans la semaine. En cas d'utilisation conforme, la batterie conserve 80 % de ses capacités après 500 cycles de charge.
- **Remarque:** Il ne faut pas effectuer de mesure, pendant que Daysy est en charge.

# Messages d'erreur & problèmes d'utilisation

## ***Daysy ne réagit pas quand j'appuie sur la touche d'activation.***

Veille à charger Daysy et réessaie de l'utiliser avant de contacter le service clientèle. Assure-toi de charger ta Daysy tous les 2–3 mois.

## ***L'anneau d'activation de Daysy clignote en bleu à intervalles rapides.***

Veille à charger la batterie de Daysy.

## ***Daysy ne mesure pas ma température.***

- Retire le câble USB avant la mesure.
- Lorsque Daysy fait directement « bip-bip », c'est que tu as déjà effectué une mesure réussie aujourd'hui.

*Tu trouveras de plus amples informations sur [daysy.me](https://daysy.me) dans la rubrique questions fréquentes, sinon n'hésite pas à contacter notre service clientèle.*

**Daysy termine la mesure par un bourdonnement (« brrr ») au lieu d'un « bip-bip ».**

La mesure a duré trop longtemps, a été interrompue ou n'a pas fonctionné. Re-commence en suivant ces conseils pratiques :

- Remplace le capteur au fond de ta bouche, à droite ou à gauche, sous ta langue.
- Ferme la bouche.
- Une fois que la mesure est en cours, il ne faut pas retirer Daysy de ta bouche, tant que tu n'as pas entendu un « bip-bip ».
- Si tu as de la fièvre, il est possible que Daysy ne prenne la mesure.  
Saute les mesures de température en cas de maladie.
- Si ton capteur est sale, nettoie-le avec un chiffon humide.

**Le voyant rouge s'allume et l'anneau d'activation clignote rapidement.**

Quelque chose ne va pas avec ta Daysy. Merci de contacter notre service clientèle.

## **Je n'utiliserai pas Daysy dans les prochains mois. Que dois-je faire ?**

Si tu ne comptes pas utiliser ta Daysy pendant un certain temps, nettoie-la, effectue une charge complète de la batterie et conserve-la dans un endroit sec et frais.

### **Comment Daysy communique avec moi ?**

- « bip-bip » : Daysy est heureuse. La mesure est réussie.
- « brrr » : Daysy n'est pas contente. La mesure n'a pas fonctionné.
- « bip » : Daysy bipes quand tu appuies sur la touche d'activation.
- Mélodie : Daysy a activé **Bluetooth®**.

*Tu trouveras de plus amples informations sur [daysy.me](https://daysy.me) dans la rubrique questions fréquentes, sinon n'hésite pas à contacter notre service clientèle.*

# Caractéristiques techniques

## **Caractéristiques importantes.**

**Nom et modèle:** Daysy **Alimentation électrique:** Source de courant interne

**Avec FCC ID:** WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **Port USB:** USB 2 micro-B

## **Compatibilité**

Compatibilité au moment de la fabrication. Tu peux obtenir la compatibilité la plus récente sur notre site web et dans les descriptions des App Stores.

**iOS:** Version 12.0 et plus récentes **Android:** Version Google Android 5.0 et plus récentes **Bluetooth®:** Version 4.0 et plus récentes

**Dimensions:** H: 13 cm / L: 2.2 cm / P: 4.8 cm **Poids:** 38g

**Code EAN:** 7 629999 05407 3

## **Information technique**

Pour utiliser l'application DaysyDay, il est nécessaire d'utiliser un smartphone ou une tablette dotés de **Bluetooth®** et du système d'exploitation iOS 12.0 ou plus récent, ou Android 5.0 ou plus récent

**Bluetooth®:** Bluetooth® 4.1 **Bande de fréquences:** 2400 – 2480 MHz

**Modulation GFSK:** FHSS **Puissance de transmission:** 0 dBm

# Indications et contre-indications

**Indications :** Daysy est un moniteur de fertilité. Pour une utilisation optimale de Daysy, des cycles d'une durée de 19–40 jours constituent la condition idéale.

**Contre-indications :** Il est **déconseillé** d'utiliser Daysy dans les cas suivants :

- Tu souffres de problèmes de santé qui pourraient rendre une grossesse dangereuse – p. ex. une tension artérielle trop basse ou trop élevée, ou des affections cardiaques, etc.
- En cas de grossesse, la santé de ton enfant serait exposée à des risques – p. ex. en cas de dépendance à des drogues ou à l'alcool ou en cas de prise de médicaments pouvant entraîner des anomalies congénitales.
- En cas de traitement hormonal ou d'utilisation de contraceptif hormonal.
- En cas de règles très irrégulières. Elles peuvent fausser, voire empêcher une prévision fiable de ta fertilité.
- Daysy n'est pas un thermomètre médical et ne doit pas être utilisé pour mesurer la température corporelle en cas de fièvre ou de maladie.

# — Consignes concernant la compatibilité électromagnétique

**Les équipements électromédicaux requièrent des précautions particulières en matière de compatibilité électromagnétique (CEM).** Daysy convient uniquement à un usage domestique non commercial.


**Les équipements de communication portables et mobiles peuvent induire sur tout appareillage électromédical.** Daysy correspond aux exigences conformément à la norme EN 60601-1-2 sur la compatibilité électromagnétique. Tu obtiendras de plus amples informations sur ces données de mesure auprès de notre service clientèle ou sur [daysy.me](http://daysy.me).

## Profil des groupes cibles

Les femmes âgées de 18 ans ou plus, sachant lire et écrire.



# Étiquette de l'appareil

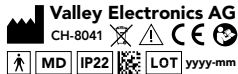

Contains: FCC ID: WAP2001 IC: 7922A-2001

Cette étiquette est la reproduction de celle qui figure au dos de Daysy. Pour une meilleure lisibilité, l'étiquette a été agrandie ici.

# Généralités



**Fabricant**



**Lire attentivement  
le mode d'emploi**



**Attention**



**Marque CE**



**Dispositif médical**



**Numéro de LOT/  
date de fabrication**



**Mandataire UE**



**DEEE:** Veille à jeter l'appareil dans un point de collecte publique pour les appareils électriques. Selon la législation et les réglementations locales, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers courants.



**Pièces appliquées de type BF**



**Code IP:** protégé contre tout corps étranger solide dépassant 12,5 mm de diamètre, et contre les projections d'eau, tant que l'inclinaison du boîtier n'est pas supérieure à 15°

# Conditions de stockage et d'utilisation



**Seuil de température:** L'appareil peut être stocké à une température comprise entre  $-20\text{ °C}$  et  $45\text{ °C}$ .



**Seuil de température:** L'appareil peut être utilisé en toute sécurité à une température comprise entre  $5\text{ °C}$  et  $40\text{ °C}$ .



**Seuil d'humidité:** L'appareil peut être stocké en toute sécurité jusqu'à un taux d'humidité relative de 93%.



**Seuil d'humidité:** L'appareil peut être utilisé en toute sécurité à un taux d'humidité compris entre 15 % et 93%.



**Seuil de pression:** L'appareil peut être stocké en toute sécurité à une pression comprise entre  $700\text{ hPa}$  et  $1060\text{ hPa}$ .



**Seuil de pression:** L'appareil peut être exposé à une pression comprise entre  $700\text{ hPa}$  et  $1060\text{ hPa}$  lors de l'utilisation.

## — Informations concernant la garantie

Daysy a été fabriquée avec le plus grand soin, à partir de matériaux ultramodernes de haute qualité. Chaque Daysy a été soumise à des contrôles et à des tests avant d'être livrée.

1. C'est pourquoi nous garantissons au premier acheteur de l'appareil que Daysy n'aura aucun défaut de matériel et de fabrication au cours de la garantie.
2. La garantie est applicable à compter de la date d'achat d'une Daysy neuve, acquise par le consommateur final, auprès d'un distributeur agréé.\*  
La garantie dure 2 ans.
3. Nous nous engageons à réparer un appareil défectueux ou à le remplacer par un nouveau. En revanche, toute autre réclamation sera exclue, notamment en cas de perte, de détérioration ou de dommages consécutifs à des vices. Les dommages indirects ne sont pas couverts par cette garantie.

*\* Note bien que notre garantie de fabricant n'est valable que lorsque tu as acheté ta Daysy auprès d'un distributeur agréé par Valley Electronics.*

4. Également exclus de la garantie sont tous les dommages résultant d'une manipulation incorrecte ou inadaptée, et notamment induits par l'ouverture de l'appareil ou par toute autre influence extérieure.
5. Au demeurant, les dommages au titre de cette garantie ne seront valables que si le consommateur final nous en informe dans les deux semaines suivant la constatation du vice, qu'il nous retourne Daysy avec une copie de la facture, en colis recommandé, et qu'il ne l'a plus utilisée depuis l'apparition du défaut.

Pour de plus amples informations n'hésite pas à contacter ton distributeur Daysy.

# Aperçu : ce que les affichages signifient

Affichage du statut de fertilité			LED M	Anneau	Signification
Rouge	Vert	Jaune	Violet	Bleu	
Allumé	–	–	–	–	Fertile / probablement fertile
Clignote	–	–	–	–	Ovulation (prédiction)
–	Allumé	–	–	–	Non fertile
–	–	Allumé	–	–	Phase d'apprentissage ou cycle irrégulier
Allumé	Allumé	Allumé	–	–	Grossesse très probable
Clignote	Clignote	Clignote	–	–	Grossesse possible
–	–	–	Clignote	–	Daysy demande de saisir la menstruation
–	–	–	Allumé	–	La menstruation est confirmée pour ce jour
–	–	–	–	Tourne	Mesure de la température
–	–	–	–	Clignote	Charger la batterie
–	–	–	–	Croissant	Batterie en charge
–	–	–	–	Allumé	Batterie chargée
–	–	–	–	1 lumière clignote	<b>Bluetooth®</b> activé, appareils non connectés
–	–	–	–	1 lumière allumée	<b>Bluetooth®</b> activé, appareils connectés

Ama il tuo corpo:  
Benvenuta su Daysy

# — Indice

## **Da pagina 90 a pagina 92 | Informazioni di sicurezza**

Cosa devi sapere.

## **Da pagina 93 a pagina 105 | Funzionamento**

Come utilizzare Daysy.

## **Da pagina 106 a pagina 114 | Indicazioni tecniche e garanzia**

Cos'altro devi sapere.



# A proposito di Daysy

Daysy calcola lo stato del ciclo mestruale quotidiano interpretando la temperatura basale. Daysy mostra lo stato del ciclo usando delle luci colorate. Daysy può essere usato per facilitare il concepimento. Tuttavia Daysy non è un contraccettivo o un termometro medico.

## **Contenuto:**

- Daysy
- Tappo di protezione per il sensore
- Cavetto Micro-USB
- Manuale d'uso
- Guida rapida



## Informazioni di sicurezza

- Si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare per la prima volta Daysy e conservarlo accuratamente per consultazioni future.
- Prima di iniziare a utilizzare Daysy è necessario interrompere l'assunzione di contraccettivi ormonali.
- Daysy può determinare meglio il tuo ciclo se hai cicli mestruali regolari.
- Daysy non è adatto qualora ci si sottoponga a trattamenti per scompensi ormonali oppure qualora si utilizzi un contraccettivo ormonale.
- Daysy non protegge da malattie veneree.
- È necessario consultare il proprio stato di fertilità direttamente da Daysy, non dall'app.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la batteria.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio.
- Non masticare il sensore.
- Non ingoiare l'apparecchio o sue parti.
- **ATTENZIONE:** L'apparecchio non deve essere modificato.

- **ATTENZIONE:** L'utilizzo di cavi o di altro materiale diverso da quello indicato nel presente documento può causare interferenze elettroniche o malfunzionamenti di Daysy.
- L'apparecchio non va esposto a temperature elevate (p.e. acqua bollente).
- L'apparecchio non va esposto per un periodo prolungato alla luce diretta del sole.
- Le misurazioni vanno fatte esclusivamente in bocca.
- Prestare attenzione a non inserire il sensore di misurazione troppo in fondo alla bocca.
- Non effettuare misurazioni se il corpo dell'apparecchio e/o il sensore è danneggiato.
- Non effettuare misurazioni se sono presenti ferite in bocca.
- Non esporre Daysy a sollecitazioni meccaniche elevate.
- Non esporre Daysy a liquidi come l'acqua corrente.
- Effettuare le misurazioni solo quando il cavo USB **NON** è collegato.
- Non inserire oggetti appuntiti in Daysy.

- Per caricare Daysy va utilizzato esclusivamente un attacco USB Standard-5V (conformità IEC 60950-1) con corrente di uscita di massimo 1A e una potenza d'uscita di massimo 4,5 W come sistema. Durante la ricarica Daysy non va utilizzato per misurare la temperatura.
- Nel caso in cui l'apparecchio dovesse comportare delle irritazioni cutanee, si consiglia di smettere immediatamente di utilizzare il prodotto e di contattare il nostro servizio clienti.
- Tutti gli episodi gravi collegati all'utilizzo del prodotto vanno notificati al produttore e all'ente competente dello stato membro UE.
- Daysy è un apparecchio personale, da non condividere con altri. In caso lo si voglia passare a un'amica, è necessario prima cancellare i propri dati e dissociare Daysy nell'app (se in uso).
- Se si passa Daysy a un'altra persona, consegnare anche le presenti istruzioni. È possibile trovare istruzioni e informazioni utili disponibili per il download su [daysy.me](https://daysy.me)
- Come utente puoi utilizzare ogni funzione di Daysy. Puoi anche pulire il sensore da sola assicurandoti che Daysy sia spenta.
- Daysy non è un contraccettivo.
- Tenere Daysy fuori dalla portata di bambini e animali.

# Panoramica di tutte le funzioni\*



\*A pagina 97 trovi tutte le principali combinazioni di indicazioni.

## — Passo 1: Scarica la tua Daysy

1. Collega Daysy al cavo Micro-USB in dotazione e il cavo ad un attacco USB. Assicurati che sia una porta da 5V e non porti più di 1 A di corrente.
2. Premendo brevemente il pulsante di attivazione, si può visualizzare lo stato di carica. Le luci blu che vanno dal basso verso l'alto indicano che Daysy si sta caricando. Daysy entrerà in modalità standby dopo 60 secondi, ma continuerà a caricarsi.
3. Quando Daysy è completamente carica, tutte le luci blu si accendono contemporaneamente. Basta premere una volta il pulsante di attivazione per verificare lo stato di carica. (Un basso stato di carica è indicato da tutte le luci blu che lampeggiano.)
4. Stacca il cavetto da Daysy. Ora puoi iniziare a usare la tua Daysy.\*\*

*\* Non effettuare una misurazione o tentare di sincronizzarsi mentre Daysy sta caricando.*

*\*\* Puoi iniziare a usare Daysy in qualsiasi momento del tuo ciclo.*

# Indicatori di misurazione: Qual è il significato di ogni indicatore?



**Luce viola lampeggiante:** Daysy aspetta l'inserimento della tua mestruazione. Conferma la tua mestruazione mantenendo premuto il tasto d'attivazione per 2 secondi.



**Luce viola fissa:** Daysy conferma l'inserimento della tua mestruazione. Se hai inserito erroneamente la tua mestruazione, tieni premuto il tasto d'attivazione per 2 secondi fino a quando la luce viola lampeggia di nuovo.



**Luce blu rotante in senso orario:** Daysy sta misurando la tua temperatura. Tenendo premuto il tasto d'attivazione per 2 secondi si interrompe la misurazione.

## — Passo 2: Misura la tua temperatura

Utilizza Daysy ogni giorno subito dopo il risveglio, prima di alzarti e di fare attività. Assicurati di aver dormito per 3 ore consecutive immediatamente prima della misurazione.

1. Togli il tappo di protezione e premi brevemente una volta il tasto d'attivazione. Ti sarà indicata la previsione del tuo stato di fertilità.
2. Premi una seconda volta il tasto e l'anello di attivazione lampeggerà in senso orario. Puoi procedere alla misurazione.
3. Metti il sensore sotto la tua lingua, il più in fondo possibile a destra o sinistra, e chiudi la bocca.
4. «Beep-beep» indica che la misurazione è andata a buon fine.\*
5. Dopo la misurazione, lo stato di fertilità visualizzato è valido fino a mezzanotte. Puoi controllare lo stato della fertilità più avanti durante il giorno premendo una volta il tasto di attivazione. Il giorno successivo Daysy passa alla previsione dello stato di fertilità prima della misurazione.

*\* Se senti un ronzio fastidioso invece di un "beep-beep", vuol dire che la misurazione non è andata a buon fine e devi ripeterla.*



# Indicatori di fertilità: Qual è il significato di ogni indicatore



Fertile/possibile fertile



Ovulazione prevista



Non fertile



Possibile gravidanza



Fase di apprendimento /  
fluttuazioni del ciclo  
(potenzialmente fertile)



Gravidanza  
molto probabile

## — Passo 3: Inserisci la tua mestruazione

Se nell'anello d'attivazione lampeggia la luce violetta «mestruazione», vuol dire che Daysy ti chiede di inserire la tua mestruazione.\*

- **Se hai le mestruazioni:** Premi il tasto d'attivazione fino a quando si accende la luce viola fissa e senti un «Beep». Conferma le mestruazioni ogni giorno di ciclo o comunque almeno per 3 giorni consecutivi. Anche se non hai preso la temperatura in un giorno, conferma comunque le mestruazioni.
- **Se non hai le mestruazioni:** Non devi fare nulla, basta prendere la temperatura.
- **Se hai le mestruazioni, ma Daysy non ti mostra la luce viola lampeggiante:** Premi il tasto d'attivazione fino a quando appare la luce viola fissa.

*\* Puoi modificare le tue mestruazioni fino a 3 giorni in anticipo. Inserisci e cambia sempre la tua mestruazione su Daysy stesso. Puoi trovare dei tutorial sul nostro sito web all'indirizzo [daysy.me/tutorials](https://daysy.me/tutorials).*

# DaysyDay: Più informata con l'app Daysy



DaysyDay ti fornisce informazioni utili sul tuo ciclo e ulteriori funzioni di monitoraggio, oltre a un'app partner.

Attiva il **Bluetooth®** sul tuo cellulare, apri DaysyDay e tocca il tasto **Bluetooth®**. Segui le istruzioni dell'app per attivare Daysy, poi premi 2 volte il tasto di attivazione di Daysy. Ora su Daysy lampeggia una luce blu seguita da una breve melodia. Quando la luce blu diventa fissa, la connessione è riuscita.




**Luce blu lampeggiante:**  
Daysy si sta connettendo.



**Luce blu fissa:**  
Daysy è connessa.

# — Temperatura e fertilità: Così si evolve il tuo ciclo

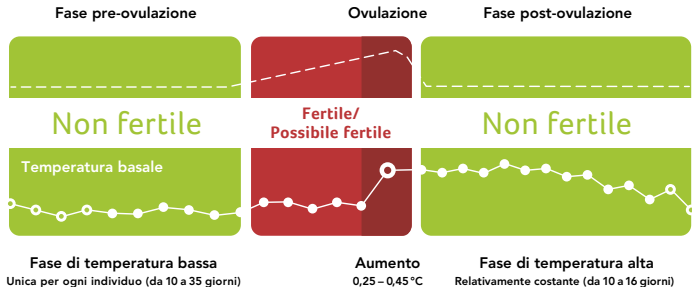

# Importante: Come utilizzare Daysy in maniera corretta

- Accertati che la prima azione al mattino sia quella di misurare la temperatura, prima di alzarti dal letto. Per un uso ottimale di Daysy, si consiglia di avere almeno 3 ore di sonno continuo prima di effettuare la misurazione. Se te ne dimentichi e ti sei già alzata, non effettuare la misurazione.
- Quando hai le mestruazioni, inserisci il dato. È importante iniziare con il primo giorno di pieno flusso sanguigno.\*
- Più regolarmente misuri la tua temperatura, più velocemente Daysy imparerà a conoscere il tuo ciclo.
- All'inizio dell'utilizzo di Daysy vedrai molto la luce gialla e rossa. Nel corso dei cicli successivi Daysy conoscerà il tuo ciclo.

\* **Importante:** il primo sanguinamento dopo l'interruzione della pillola o di altri metodi contraccettivi ormonali è un'emorragia da sospensione ormonale e non una mestruazione. Non inserire mai questa emorragia come mestruazione.

## — Pulizia

- Pulire Daysy prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulisci il sensore di Daysy delicatamente con un panno umido. Puoi utilizzare anche un po' di alcool o sapone. Assicurati che soltanto il collo del sensore venga a contatto con il liquido poiché Daysy non è impermeabile. Non pulire Daysy sotto l'acqua corrente.

## Batteria

- In base all'utilizzo di Daysy, la carica dura da 1–2 mesi. Poco prima che la batteria si scarichi, l'anello d'attivazione di Daysy lampeggia a intervalli frequenti. Assicurati di caricare la batteria entro 1 settimana. Con un utilizzo normale del prodotto, la batteria conserva l'80% della sua capacità anche dopo 500 cicli di ricarica.
- **Attenzione:** Non puoi effettuare nessuna misurazione quando Daysy è in carica.

# Messaggi d'errore / Problemi con l'utilizzo

## ***Daysy non reagisce quando si preme il tasto d'attivazione.***

Si prega di ricaricare Daysy e provare di nuovo prima di contattare il servizio clienti. Assicurati di caricare la tua Daysy ogni 2–3 mesi.

## ***La luce blu dell'anello d'attivazione di Daysy lampeggia.***

Si prega di ricaricare la batteria di Daysy.

## ***Daysy non avvia la misurazione.***

- Togli il cavetto USB prima di effettuare la misurazione.
- Se Daysy emette direttamente il suono «Beep-beep» significa che oggi hai già effettuato con successo una misurazione.

*Per ulteriori informazioni, si prega di leggere le FAQ sul sito [daysy.me](http://daysy.me), oppure contattare il nostro servizio clienti.*

***Daysy interrompe la misurazione con un ronzio fastidioso anziché con il suono «Beep-beep».***

La misurazione è durata troppo a lungo, è stata interrotta o non è stata effettuata correttamente. Puoi seguire i seguenti consigli:

- Inserisci nuovamente il sensore in fondo, a destra o sinistra, sotto la lingua.
- Chiudi la bocca
- Dopo l'avvio della misurazione non togliere Daysy dalla bocca fino a quando non senti il suono «Beep-beep».
- Se dovessi avere la febbre, probabilmente Daysy non accetta la misurazione. Quando sei malata, non effettuare misurazioni.
- Se il sensore dovesse essere molto sporco, puliscilo con un panno umido.

***La luce rossa si illumina e l'anello d'attivazione lampeggia rapidamente.***

Qualcosa non va con Daysy. Per favore contatta il nostro servizio clienti.



## ***Nei prossimi mesi non userò Daysy. Cosa devo fare?***

Se per un lungo periodo non vuoi utilizzare Daysy, pulisci l'apparecchio, carica completamente la batteria e conservalo in un luogo asciutto e fresco.

## ***Come comunica Daysy con me?***

- «Beep-beep»: Daysy è contenta. La misurazione è andata a buon fine.
- «Ronzio»: Daysy non è soddisfatta. La misurazione non è andata a buon fine.
- «Beep»: Daysy fa beep quando premi il tasto d'attivazione.
- Melodia: Daysy ha attivato il **Bluetooth®**.

*Per ulteriori informazioni, si prega di leggere le FAQ sul sito [daysy.me](http://daysy.me), oppure contattare il nostro servizio clienti.*

# — Specifiche tecniche

## **Caratteristiche principali**

**Nome e modello:** Daysy **Alimentazione:** Alimentazione interna

**Contiene FCC ID:** WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **Collegamento USB:** USB 2 Micro-B

## **Compatibilità**

Compatibilità al momento della fabbricazione. Controlla il nostro sito web e le descrizioni dell'app store per l'ultima compatibilità.

**iOS:** Versione 12.0 e successive **Android:** Versione Google Android 5.0 e successive **Bluetooth®:** Versione 4.0 e successive

**Dimensione:** A/B/P 13 / 2.2 / 4.8 cm **Peso:** 38gr

**Codice EAN:** 7 629999 05407 3

## **Informazioni tecniche**

Per poter utilizzare l'app DaysyDay è necessario disporre di uno smartphone con Bluetooth® oppure di un tablet con sistema operativo iOS 12.0 / Android 5.0 e successivi.

**Bluetooth®:** Bluetooth® 4.1 **Frequenza banda:** 2400 – 2480 MHz

**GFSK modulazione:** FHSS **Trasmissione corrente:** 0 dBm

# Indicazioni e controindicazioni

**Indicazioni:** Daysy serve a monitorare la fertilità. Per un utilizzo ottimale di Daysy, i cicli di 19–40 giorni sono ideali.

**Controindicazioni:** Nei seguenti casi **non** utilizzare Daysy:

- Presenza di malattie, per le quali una gravidanza potrebbe metterti a rischio, ad es. pressione arteriosa troppo alta o troppo bassa oppure patologie cardiache.
- Presenza di rischio di salute per il bambino in caso di gravidanza, ad es. dipendenza da droghe o alcool o in caso di assunzione di medicinali che possono provocare malformazioni congenite.
- In caso di trattamento ormonale oppure se usi un contraccettivo ormonale.
- In caso di ciclo molto irregolare. I cicli irregolari possono influenzare negativamente oppure rendere impossibile una stima della fertilità.
- Daysy non è un termometro medico e non deve essere usato per misurare la temperatura corporea come indicazione di febbre o malattia.

## — Indicazione sulla compatibilità elettromagnetica

***Gli apparecchi elettrici a scopo medico devono rispettare delle misure precauzionali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica.***


Daysy è destinato esclusivamente all'uso domestico non commerciale.

***I dispositivi portatili e mobili HF possono influenzare gli apparecchi elettrici a scopo medico.*** Daysy è in linea con le richieste dettate dalla normativa europea EN 60601-1-2 per quanto riguarda la tolleranza elettromagnetica. Puoi richiedere dettagli su questi dati di misurazione presso il nostro servizio clienti oppure su [daysy.me](http://daysy.me).

## Profilo del gruppo target

Donne con età pari o superiore ai 18 anni e che sanno leggere e scrivere.

# Etichetta dell'apparecchio

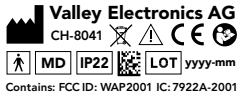

La seguente immagine ti mostra l'etichetta dell'apparecchio applicata sul retro di Daysy. Al fine di renderla più leggibile, abbiamo ingrandito l'immagine.

# — Informazioni generali



**Produttore**



**Leggere attentamente  
le istruzioni**



**Attenzione**



**Marchio CE**



**Dispositivo medico**



**Numero di lotto/  
Data di fabbricazione**



**Mandatario UE**



**RAEE:** si prega di smaltire il dispositivo nelle apposite isole ecologiche per apparecchiature elettriche. Il dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti urbani domestici ai sensi delle normative e disposizioni locali.



**Pezzi di utilizzo del tipo BF**



**Codice IP:** protetto da corpi estranei solidi da un diametro di 12,5 mm e da schizzi d'acqua quando il corpo del dispositivo è inclinato fino a 15°.

# Condizioni di conservazione e utilizzo



**Limite di temperatura:** L'apparecchio può essere conservato ad una temperatura tra  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $45^{\circ}\text{C}$ .



**Limite di temperatura:** L'apparecchio può essere utilizzato senza problemi ad una temperatura tra  $5^{\circ}\text{C}$  e  $40^{\circ}\text{C}$ .



**Limite di umidità:** L'apparecchio può essere conservato senza problemi ad un'umidità relativa fino al 93 %.



**Limite di umidità:** L'apparecchio può essere utilizzato senza problemi ad un'umidità relativa tra il 15 % e 93 %.



**Limite di pressione:** L'apparecchio può essere conservato ad una pressione tra 700 hPa e 1060 hPa.



**Limite di pressione:** L'apparecchio durante l'utilizzo può essere esposto ad una pressione tra 700 hPa e 1060 hPa.



## Informazioni sulla garanzia

Daysy è stato prodotto con cura utilizzando materiali moderni e di alta qualità. Ogni Daysy prima della consegna è stato sottoposto a svariati controlli e verifiche.

1. Garantiamo all'acquirente originale per la durata della garanzia l'assenza di difetti di materiale e di fabbricazione su Daysy.
2. La garanzia inizia con la data della vendita di una nuova Daysy da parte di un rivenditore\* autorizzato. La durata della garanzia di Daysy è di 2 anni.
3. Ci impegniamo a riparare un apparecchio difettoso o sostituirlo con un apparecchio nuovo. Sono escluse altre richieste, soprattutto per perdita o danni provocati all'apparecchio.  
I danni indiretti non sono coperti dalla garanzia.

*\* La garanzia del produttore vale soltanto acquistando Daysy in un negozio autorizzato da Valley Electronics.*



4. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni dovuti ad un utilizzo improprio, soprattutto in caso di apertura dell'apparecchio; la stessa cosa vale per azioni esterne.
5. I diritti di garanzia possono essere esercitati soltanto se l'acquirente finale ci notifica il difetto tempestivamente per iscritto, al massimo entro due settimane da quando ne viene a conoscenza. Daysy non deve essere più utilizzata una volta scoperto il difetto, ma deve essere inviata al distributore autorizzato con una copia della fattura di acquisto con copertura di assicurazione per il trasporto.

Se hai altre domande o se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a contattare il tuo distributore Daysy.

# — Panoramica: Cosa significano gli indicatori

Indicazione di fertilità			M-LED	Anello	Significato
Rosso	Verde	Giallo	Viola	Blu	
Si illumina	–	–	–	–	Fertile/possibile fertile
Lampeggia	–	–	–	–	Ovulazione (previsione)
–	Si illumina	–	–	–	Non fertile
–	–	Si illumina	–	–	Fase d'apprendimento o fluttuazione del ciclo
Si illumina	Si illumina	Si illumina	–	–	Gravidanza molto probabile
Lampeggia	Lampeggia	Lampeggia	–	–	Possibile gravidanza
–	–	–	Lampeggia	–	Daysy chiede l'inserimento delle mestruazioni
–	–	–	Si illumina	–	Le mestruazioni sono confermate per questo giorno
–	–	–	–	Ruota	Misurazione della temperatura
–	–	–	–	Lampeggia	Caricare la batteria
–	–	–	–	Aumenta	La batteria è in carica
–	–	–	–	Si illumina	La batteria è carica
–	–	–	–	Lampeggia 1 luce	<b>Bluetooth®</b> attivato, dispositivi non collegati
–	–	–	–	Si illumina 1 luce	<b>Bluetooth®</b> attivato, dispositivi collegati

# Ama tu cuerpo: Bienvenido a Daysy

# Índice de contenido

## **Página 118 a 120 | Indicaciones de seguridad**

Lo que necesitas saber.

## **Página 121 a 133 | Funcionamiento**

Cómo utilizar Daysy.

## **Página 134 a 142 | Indicaciones técnicas y garantía**

Otras cosas que necesitas saber.

# Sobre Daysy

Daysy calcula el estado diario del ciclo menstrual de la mujer interpretando la temperatura corporal basal. Daysy te muestra tu estado de ciclo menstrual mediante luces de colores. Daysy se utiliza para facilitar la concepción. Sin embargo, Daysy no fue diseñado como reemplazo de los métodos anti-conceptivos y tampoco es un termómetro médico.

## **El suministro incluye:**

- Daysy
- Tapa protectora para el sensor
- Cable micro-USB
- Instrucciones de uso
- Guía Rápida



## Indicaciones de seguridad


- Por favor, lee estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar Daysy por primera vez y guárdalas en un lugar seguro para futuras consultas.
- Necesitas discontinuar totalmente los métodos anticonceptivos hormonales antes de comenzar a usar Daysy.
- Daysy puede determinar mejor tu ciclo si tienes ciclos menstruales regulares.
- Daysy no está indicado si estás bajo tratamiento hormonal o si estás usando un método anticonceptivo hormonal.
- Daysy no te protege contra enfermedades de transmisión sexual.
- Siempre debes leer el estado de fertilidad diario directamente en Daysy y no en la aplicación.
- Carga la batería completamente antes de usar Daysy por primera vez.
- Nunca abras la carcasa.
- Nunca mastiques el sensor.
- Ten cuidado de no tragarte el dispositivo o partes de él.
- **ADVERTENCIA:** No se debe modificar el dispositivo.

- **ADVERTENCIA:** Evita el uso de Daysy a una distancia igual o menor de 30cm de otros aparatos electrónicos, ya que esto puede causar un mal funcionamiento.
- **ADVERTENCIA:** El uso de cables o equipos distintos a los especificados en este documento puede causar interferencias eléctricas o fallos en Daysy.
- No expongas Daysy a altas temperaturas (por ejemplo, agua hirviendo).
- No expongas Daysy durante largos períodos de tiempo a la luz directa del sol.
- No expongas Daysy a líquidos como el agua corriente.
- Solo toma la medición en la boca.
- No introduzcas demasiado el sensor de medición en la boca.
- No te tomes la medición si la carcasa y/o el sensor está roto.
- No te tomes la medición si tienes una lesión en la boca.
- Solo carga tu Daysy con una conexión estándar de 5V USB (cumple con IEC 60950-1) con una salida máxima de corriente de 1A y una capacidad máxima de salida de 4,5W con un cable que mide menos de 50cm. No te tomes la medición con tu Daysy mientras se esté cargando.

- No expongas tu Daysy a una carga mecánica demasiado alta.
- Solo toma la medición cuando el cable USB NO esté conectado.
- No introduzcas objetos punzantes en tu Daysy.
- Si tu Daysy causa irritación en la piel, recomendamos dejar de utilizarlo inmediatamente y ponerse en contacto lo antes posible con nuestro servicio al cliente.
- Todos los incidentes graves relacionados con este producto deberían ser comunicados al fabricante y a la autoridad gubernamental competente del estado miembro de la UE.
- Daysy esta diseñado solo para ti. No lo debes compartir con otras mujeres. Si se lo quieres regalar a una amiga, primero necesitaras borrar tus datos y desvincular Daysy en la aplicación (si la usas).
- Solo entrega tu Daysy a otras personas con estas instrucciones. También puedes descargar las instrucciones y más información útil disponible para su descarga en [daysy.me](https://daysy.me).
- Como usuaria puedes usar todas las funciones de tu Daysy. También podrás limpiar el sensor tú misma cuando tu Daysy esté apagado.
- Daysy no es un método anticonceptivo.
- Mantenga Daysy fuera del alcance de los niños y de las mascotas.



# Todas las funciones de un vistazo\*

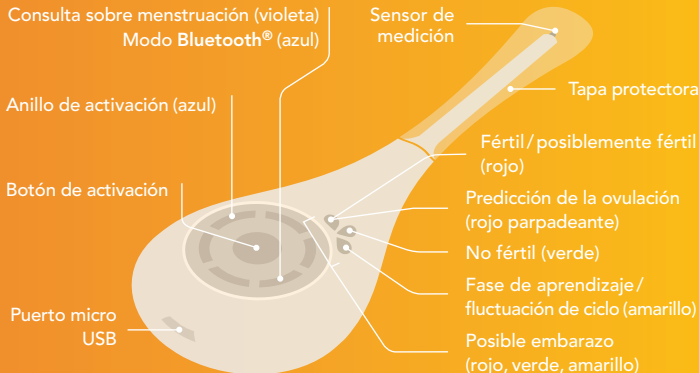

\* En la página 125 encontrarás todas las combinaciones de visualización importantes.

## — Paso 1: Carga tu Daysy

1. Conecta tu Daysy al cable micro USB suministrado en el envío y el cable a un puerto USB. Asegúrate de que esta conexión tenga 5V y no más de 1A de corriente.
2. Presiona el botón de activación para ver el estado de carga. Las luces azules que se mueven de abajo hacia arriba indican que Daysy se está cargando. Daysy entrará en modo de espera después de 60 segundos, pero continuará cargándose.\*
3. Cuando la batería esté completamente cargada, se iluminarán todas las luces azules. Simplemente presiona el botón una vez para comprobar el estado de carga. (Una carga baja se indica con el parpadeo de todas las luces azules.)
4. Desconecta tu Daysy del cable. Puedes empezar a utilizar tu Daysy ahora.\*\*

\* No tomes la medición o intentes sincronizar mientras Daysy se está cargando.

\*\* Puedes empezar a usar Daysy en cualquier momento de tu ciclo.

# Indicadores de medida: Lo que significa cada indicador



**Luz violeta parpadea:** Daysy te está preguntando si estás menstruando. Confirma que sí estás menstruando manteniendo presionado el botón de activación durante dos segundos.



**Luz violeta permanece iluminada constantemente:** Daysy confirma los datos de tu menstruación. Si has introducido tu menstruación incorrectamente o por equivocación, mantén presionado el botón de activación durante dos segundos hasta que la luz violeta vuelva a parpadear.



**Luz azul que gira en el sentido de las agujas del reloj:** Daysy está tomando tu temperatura. La toma de temperatura se interrumpe al mantener presionado el botón de activación durante dos segundos.

## — Paso 2: Tomarte la temperatura

Utiliza tu Daysy cada día después de despertarte, antes de levantarte y ponerte en marcha. Asegúrate de dormir 3 horas consecutivas inmediatamente antes de la medición.

1. Quita la tapa protectora y pulsa brevemente una vez el botón de activación. Se visualizará el estado de fertilidad pronosticado.
2. Pulsa por segunda vez el botón y el anillo de activación parpadeará en el sentido de las agujas del reloj. Ahora puedes tomarte la medición.
3. Introduce el sensor lo máximo posible debajo de la parte derecha o izquierda de la lengua y luego cierra la boca.
4. El pitido «bip-bip» significa que la fase de medición se ha completado con éxito.\*
5. Tras la medición, el nivel de fertilidad mostrado será válido hasta el día siguiente. También puedes visualizar el estado de fertilidad durante el día pulsando el botón de activación una vez brevemente. Al día siguiente tu Daysy cambia al estado de fertilidad pronosticado antes de tu medición.

*\* Si escuchas un zumbido en lugar del pitido «Bip-Bip», significa que la medición no se realizó correctamente y necesitaras que intentar de nuevo.*

# Indicadores de fertilidad: Lo que significa cada indicador



Fértil/posiblemente fértil



Predicción de la ovulación



No fértil



Posible embarazo



Fase de aprendizaje/  
fluctuación de ciclo  
(potencialmente fértil)



Embarazo  
muy probable

## — Paso 3: Introduce tu menstruación

Si la luz violeta de «**menstruación**» parpadea en el anillo de activación, significa que Daysy te está preguntando por los datos de tu menstruación.\*

- **Si estás menstruando:** Mantén presionado el botón de activación hasta que la luz violeta se ilumine sin parpadear y escuches el «Bip». Confirma tu menstruación cada día de sangrado y flujo activo por un mínimo de 3 días consecutivos. Siempre confirma tu menstruación, incluso si no te mediste la temperatura ese día.
- **Si no estás menstruando:** No tienes que hacer nada, sólo tomarte la temperatura.
- **Si estas menstruando, pero Daysy no te muestra la luz violeta parpadeante:** Mantén presionado el botón de activación hasta que la luz violeta se ilumine de manera constante.

\* *Puedes editar tu menstruación hasta 3 días de forma retrospectiva. Por favor, haz siempre las entradas y cambios de tu menstruación directamente en Daysy. Puedes encontrar tutoriales en nuestra página web en [daysy.me/tutorials](https://daysy.me/tutorials).*

# DaysyDay: Infórmate mejor con la aplicación de Daysy



DaysyDay te da información valiosa sobre tu ciclo y funciones adicionales de seguimiento, así como una aplicación asociada.

Activa el **Bluetooth®** en tu móvil, abre DaysyDay y toca el botón de **Bluetooth®**. Sigue las instrucciones de la aplicación para activar Daysy y pulsa el botón de activación de Daysy 2 veces seguidas. Se encenderá una luz azul en tu Daysy y sonará una melodía breve. Cuando la luz azul permanece iluminada, significa que la conexión ha tenido éxito.




**Luz azul parpadea:**  
Daysy se está conectando.



**Luz azul contante:**  
Daysy está conectado.

# — Temperatura y fertilidad: Así funciona tu ciclo

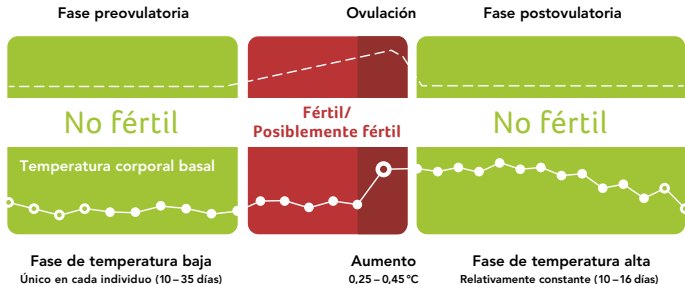



# Importante: Cómo usar tu Daysy correctamente

- Asegúrate de que lo primero que haces sea tomarte la temperatura cada mañana antes de levantarte. Para un uso óptimo de Daysy, te recomendamos que tengas al menos 3 horas de sueño continuo antes de la medición. Si lo olvidas y ya te has levantado, no procedas a tomarte la temperatura.
  - Si estas menstruando, introduce los datos en consecuencia. Es importante comenzar con el primer día de plena circulación de la sangre.\*
  - Cuanto más regularmente te tomes la temperatura, más rápido aprenderá Daysy cómo es tu ciclo.
  - Al empezar a usar tu Daysy verás muchos días amarillos y rojos. Durante el curso de los próximos 3–4 ciclos, Daysy aprenderá tu ritmo único de tu ciclo menstrual.
- \* **Importante:** El primer sangrado después de dejar la píldora u otros métodos anticonceptivos hormonales es un sangrado de abstinencia hormonal y no una menstruación. No introduces este sangrado como menstruación.

## — Limpieza

- Limpie Daysy antes y después de cada uso.
- Usa un paño húmedo para limpiar cuidadosamente el sensor de tu Daysy. También puedes usar un poco de alcohol o de jabón. Ya que Daysy no es resistente al agua, asegúrate de que solo el cuello en el sensor entre en contacto con el líquido y no el dispositivo entero. No limpies Daysy bajo agua corriente.

## Batería

- Dependiendo de la frecuencia de su uso, la carga de batería de Daysy durará de 1–2 meses. Para indicar que la batería está casi agotada, el anillo de activación de tu Daysy parpadeará en intervalos cortos. Asegurate de cargar la batería dentro de una semana. Con un uso normal, la batería aún tendrá el 80% de su capacidad tras 500 cargas.
- **Aviso:** No debes tomar mediciones mientras se esté cargando Daysy.

# Avisos de error / Problemas de funcionamiento

## ***Mi Daysy no reacciona tras pulsar el botón de activación.***

Por favor carga tu Daysy e inténtalo de nuevo antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente.

## ***El anillo de activación de mi Daysy parpadea en azul con intervalos cortos.***

Por favor, carga la batería de tu Daysy.

## ***Mi Daysy no comienza a tomar la medición.***

- Quita el cable USB antes de tomar la medición.
- Si tu Daysy hace el pitido «Bip-Bip», significa que la temperatura ya se ha tomado con éxito el día de hoy.

*Para más información, consulta nuestra sección de FAQ (preguntas frecuentes) en [daysy.me](https://daysy.me) o contacta con nuestro equipo del servicio de atención al cliente.*

***Mi Daysy termina de tomar la medición con un zumbido en vez de con un pitido «Bip-Bip».***

La medición ha durado demasiado, se ha interrumpido o no se realizó correctamente. Intenta seguir estos consejos:

- Igual que antes, introduce el sensor al máximo cómodamente debajo de la parte derecha o izquierda de la lengua.
- Cierra la boca.
- No saques tu Daysy de la boca hasta que escuches el pitido «Bip-Bip».
- Si tienes fiebre, puede que Daysy no acepte la medición.  
Deja de tomar mediciones si estás enferma.
- Si el sensor se ensucia, simplemente límpialo con un paño húmedo.

***La luz roja se ilumina y el anillo de activación parpadea en intervalos cortos.***

Algo está mal con tu Daysy. Por favor contacta nuestro equipo del servicio de atención al cliente

## **No voy a usar Daysy en los próximos meses.**

### **¿Qué necesito hacer?**

Si quieres dejar de usar tu Daysy por un período prolongado, límpialo, carga la batería completamente y guárdalo en un lugar fresco y seco. Asegúrate de recargar tu Daysy cada 2–3 meses.

### **¿Cómo se comunica mi Daysy conmigo?**

- «Bip-Bip»: Daysy está contento. La medición fue un éxito.
- «Zumbido»: Daysy no está contento. La medición no se realizó correctamente.
- «Bip único»: Daysy pita cuando presionas el botón de activación.
- Melodía: Daysy ha activado el Bluetooth®.

*Para más información, consulta nuestra sección de FAQ (preguntas frecuentes) en [daysy.me](https://daysy.me) o contacta con nuestro equipo del servicio de atención al cliente.*

## — Datos técnicos

### **Características importantes**

**Nombre y modelo:** Daysy **Suministro eléctrico:** Fuente de alimentación interna

**Contiene ID FCC:** WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **Conexión USB:** USB 2 Micro-B

### **Compatibilidad**

Compatibilidad en el momento de la fabricación. Comprueba la compatibilidad actual en el sitio web y en las descripciones de la tienda de aplicaciones.

**iOS:** Versión 12.0 y superior **Android:** Versión de Google-Android 5.0 y superior

**Bluetooth®:** Versión 4.0 y superior

**Dimensiones:** Altura/Anchura/Profundidad 13/2.2/4.8 cm **Peso:** 38g

**Código EAN:** 7 629999 05407 3

### **Información técnica**

Para utilizar la aplicación DaysyDay se necesita un móvil o tablet compatible con Bluetooth® y sistema operativo iOS 12.0/Android 5.0 o posterior.

**Bluetooth®:** Bluetooth® 4.1 **Banda de frecuencia:** 2400 – 2480 MHz

**Modulación GSKF:** FHSS **Potencia de transmisión:** 0 dBm

# Indicaciones y contraindicaciones

**Indicaciones:** Daysy es un dispositivo de seguimiento del ciclo menstrual. Para un uso óptimo de Daysy, lo ideal son ciclos de 19-40 días.

**Contraindicaciones:** No debes usar Daysy en los siguientes casos:

- Si padeces de alguna enfermedad en la cual pueda ser peligroso si te quedas embarazada – por ejemplo, presión arterial demasiado alta o baja, si padeces de enfermedad cardiovascular, etc.
- Si puede haber riesgos para la salud de tu bebé en caso de embarazo, – por ejemplo, si padeces de adicción a las drogas o alcohol, o si estás tomando medicamentos que puedan causar anomalías congénitas.
- Si estás bajo tratamiento hormonal o si estás usando un método anticonceptivo hormonal.
- En caso de que tengas sangrado irregular. Esto podría interferir con tu pronóstico de fertilidad o causar que sea inutilizable.
- No se debe usar para medir la temperatura como indicación de fiebre o enfermedad ya que Daysy no es un termómetro médico.

## — Indicación sobre compatibilidad electromagnética

**Los dispositivos médicos eléctricos están sometidos según su compatibilidad electromagnética a medidas de precaución especiales.** Daysy esta destinado solamente para uso no comercial en casa.


**Los dispositivos portátiles y móviles de comunicación de alta frecuencia pueden alterar los aparatos médicos eléctricos.** Daysy cumple con las exigencias de la norma EN 60601-1-2 para compatibilidad electromagnética. Puedes encontrar más detalles sobre estos datos de medición de nuestro servicio de atención al cliente o en [daysy.me](http://daysy.me).

## Perfil del público objetivo

Mujeres mayores de 18 años que pueden leer y escribir.



# Etiqueta del dispositivo

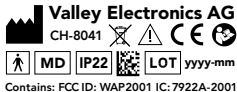

El gráfico siguiente muestra la etiqueta del dispositivo que esta adherida en la parte posterior de tu Daysy. La etiqueta se muestra más grande para mejor legibilidad.

# — Información general



**Fabricante**



**Lee estas instrucciones con cuidado**



**Atención**



**Etiqueta CE**



**Producto sanitario**



**Número de lote/  
Fecha de fabricación**



**Representante  
Autorizado UE**



**WEEE:** Por favor, desecha el dispositivo en un centro público de reciclaje para aparatos eléctricos. Se prohíbe que el dispositivo se deseché con la basura doméstica según las leyes y reglamentos locales.



**Partes de aplicación del tipo BF**



**Código IP:** Protegido contra objetos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra salpicaduras siempre y cuando la carcasa tenga una inclinación de 15°.

# Condiciones de almacenaje y utilización



**Límite de temperatura:** El dispositivo se puede guardar a temperaturas entre  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $45^{\circ}\text{C}$ .



**Límite de temperatura:** El dispositivo se puede utilizar sin restricción alguna a una temperatura entre  $5^{\circ}\text{C}$  y  $40^{\circ}\text{C}$ .



**Límite de humedad:** El dispositivo se puede guardar sin restricción alguna a una humedad relativa de hasta 93 %.



**Límite de humedad:** El dispositivo se puede utilizar sin restricción alguna a una humedad relativa de entre 15 % y 93 %.



**Límite de presión:** El dispositivo se puede guardar a una presión de entre 700 hPa y 1060 hPa.



**Límite de presión:** El dispositivo se puede exponer a una presión de entre 700 hPa y 1060 hPa.

## — Información sobre garantía

Daysy se ha fabricado con sumo cuidado utilizando los materiales más modernos y de la más alta calidad. Cada dispositivo Daysy ha sido sometido a numerosos controles e inspecciones antes de su suministro.

1. Por esto, garantizamos al comprador original que Daysy está libre de defectos en materiales y mano de obra durante su plazo de garantía.
2. El plazo de garantía comienza el día de la venta del nuevo Daysy por parte del distribuidor autorizado al consumidor final. La garantía tiene una validez de 2 años.
3. Nos comprometemos a reparar un dispositivo defectuoso o a reemplazarlo por uno nuevo. Quedan excluidas las reclamaciones adicionales, en especial por pérdidas o daños, incluyendo daños consecuentes. Los daños indirectos no están sujetos a la garantía.

*\* Por favor, ten en cuenta que nuestra garantía limitada solo tiene validez si has adquirido Daysy de un distribuidor autorizado por Valley Electronics.*

4. La garantía no cubre cualquier daño causado por manejo inadecuado, especialmente por abrir el dispositivo, daños a la etiqueta de inspección, o por otras influencias externas.
5. Reclamaciones de garantía solo son validas si el usuario comunica el defecto inmediatamente en escrito dentro de dos semanas después de encontrar el defecto. En cuanto se descubra el defecto, el usuario no debe usar su Daysy, sino devolverlo al distribuidor autorizado vía entrega asegurado con una copia de la factura de compra original.

Si tienes alguna pregunta o necesitás más información, por favor no dudes en contactar tu distribuidor de Daysy.

# — Resumen: ¿Que significan los indicadores?

Indicador de estado			Luz de M	Anillo	Significado
Rojo	Verde	Amarillo	Violeta	Azul	
Iluminado	-	-	-	-	Fértil / Posiblemente fértil
Parpadea	-	-	-	-	Ovulación (predicción)
-	Iluminado	-	-	-	No fértil
-	-	Iluminado	-	-	Fase de aprendizaje o fluctuación de ciclo
Iluminado	Iluminado	Iluminado	-	-	Embarazo muy probable
Parpadea	Parpadea	Parpadea	-	-	Posible embarazo
-	-	-	Parpadea	-	Daisy pide que introduzcas los datos de tu menstruación
-	-	-	Iluminado	-	Se ha confirmado la menstruación para este día
-	-	-	-	Gira	Medición de temperatura
-	-	-	-	Parpadea	Cargar batería
-	-	-	-	Creciente	La batería se está cargando
-	-	-	-	Iluminado	La batería está cargada
-	-	-	-	1 luz parpadea	<b>Bluetooth®</b> activado, dispositivos no conectados
-	-	-	-	1 luz iluminado	<b>Bluetooth®</b> activado, dispositivos conectados



**daysy.me**

**Development, Manufacturing,  
Worldwide Distribution**

Valley Electronics AG  
Maneggstrasse 45  
8041 Zurich, Switzerland

**Distribution  
North and South America**

Valley Electronics LLC  
399 Arcola Rd., Suite 105  
Collegeville, PA 19426, USA



**European Representative,  
Importer, Distributor**

M.I.S.S. GmbH  
Breite 2  
82418 Murnau, Germany